


Aquatec® Sorrento


en	Shower Chair / Shower Stool User Manual
de	Duschstuhl/Duschhocker Gebrauchsanweisung
fr	Chaise de douche / Tabouret de douche Manuel d'utilisation
it	Sedia da doccia / Sgabello da doccia Manuale d'uso
es	Taburete/silla de ducha Manual del usuario
pt	Banco de duche/cadeira de duche Manual de utilização
nl	Douchestoel / douchekruk Gebruiksaanwijzing
da	Brusestol/brusetaburet Brugsanvisning
no	Dusjstol/dusjkrakk Bruksanvisning
sv	Duschstol/Duschpall Bruksanvisning
fi	Suihkutuoli/suihkujakkara Käyttöohie







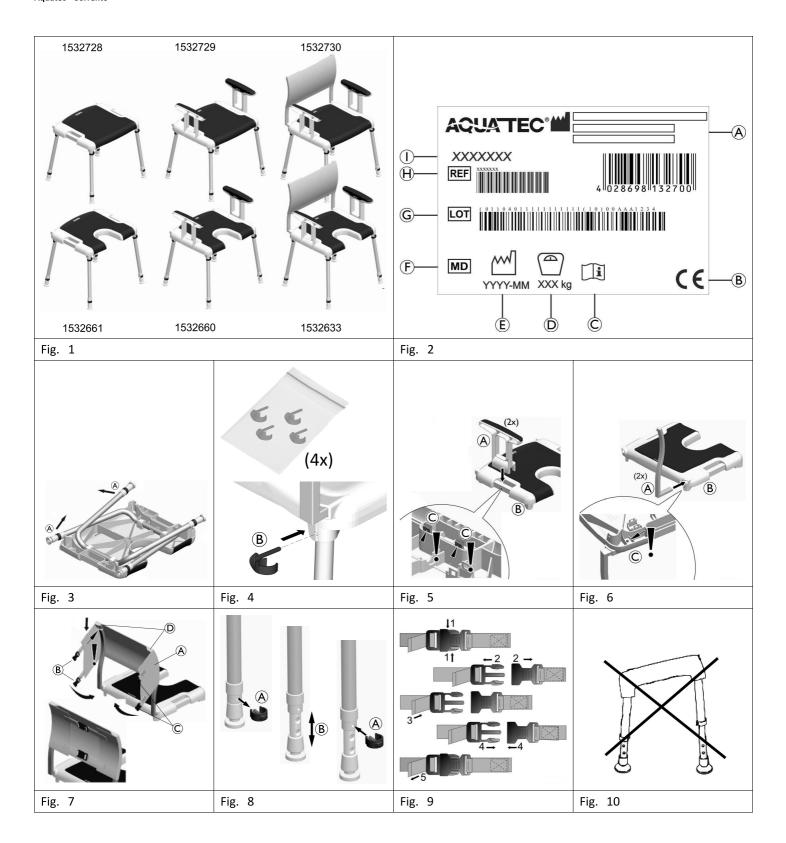

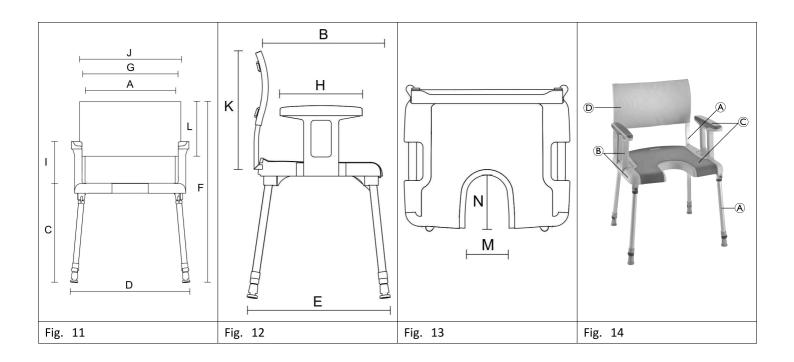

en

1 Introduction

This user manual contains important information about the handling of the product. To ensure safety when using the product, read the user manual carefully and follow the safety instructions.

Invacare reserves the right to alter product specifications without further notice.

Before reading this document, make sure you have the latest version. You find the latest version as a PDF on the Invacare website.

If you find that the font size in the printed document is difficult to read, you can download the PDF version from the website. The PDF can then be scaled on screen to a font size that is more comfortable for you.

In case of a serious incident with the product, you should inform the manufacturer and the competent authority in your country.

2 Warranty Information

We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance with our General Terms and Conditions of Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider from whom the product was obtained.

3 Compliance

Quality is fundamental to the company's operation, working within the disciplines of ISO 13485.

This product features the CE mark, in compliance with the Medical Device Regulation 2017/745 Class I. The launch date of this product is stated in the CE declaration of conformity.

We are continuously working towards ensuring that the company's impact on the environment, locally and globally, is reduced to a minimum.

We only use REACH compliant materials and components.

3.1 Product-specific Standards

The product has been tested and conforms to EN 12182 (Assistive products for persons with disability) and related standards. For further information about local standards and regulations, contact your local Invacare representative. See addresses at the end of this document.

4 Service Life

The expected service life of this product is three years when used daily and in accordance with the safety instructions, maintenance intervals and correct use, stated in this manual. The effective service life can vary according to frequency and intensity of use.

5 Limitation of Liability

Invacare accepts no liability for damage arising from:

- Non-compliance with the user manual
- Incorrect use
- Natural wear and tear
- Incorrect assembly or set-up by the purchaser or a third party
- Technical modifications
- Unauthorised modifications and/or use of unsuitable spare parts

6 Safety

6.1 Safety Information



WARNING!

Risk of Serious Injury or Damage

Improper use of this product may cause injury or damage.

- If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a health care professional or provider before attempting to use this equipment.
- Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as user manual, service manual or instruction sheet supplied with this product or optional equipment.



WARNING! Risk of Falling

- Do not use if defective.
- Do not make any unauthorized alterations or modifications to the product.
- Do not move or displace the product under load or during use.
- Do not stand on this product.
- Do not use or store the product outdoors.
- Do not tilt.
- All four legs must be adjusted to the same height. (Fig. 10)
- All four leg tips must be in contact with shower
 / tub floor at all times and on even surface.



WARNING!

- Before first use, clean the product thoroughly.
- Before every use, check the product for damage and ensure that it is securely assembled.



CAUTION!

Risk of Injury

Non-original or wrong parts may affect the function and safety of the product.

- Only use original parts for the product in use.
- Due to regional differences, refer to your local Invacare catalog or website for available options or contact your Invacare distributor. See addresses at the end of this document.

6.2 Labels and Symbols on the Product (Fig. 2)

A	Manufacturer	F	Medical Device
B	European Conformity	G	Lot number
©	Read user manual	Θ	Reference number
D	Maximum user weight	1	Product designation
E	Production date		

The identification label is attached to the underside of the seat plate.

7 Scope of Delivery (Fig. 1)

- Seat plate with foldable legs
- Armrest (if applicable) (2x)

- Backrest (if applicable)
- Safety clips (4x)
- User manual

The scope of delivery depends on the version ordered. The possible versions are shown in figure 1.

Not all products, models or accessories may be available in every country.

8 Product Description

Aquatec Sorrento is a shower stool / chair composed of four anti-slip height adjustable and foldable legs and a padded plastic seat. The product is available with or without two padded detachable armrests and with or without a textile backrest and with or without the hygiene cut-out on the seat, depending on the users' requirements.

9 Intended Use

This product is intended to be used as a shower aid.

Users are any adults and adolescents with restricted or limited mobility (e.g.: legs and/or hips). If used without an assistant, the users must be able to keep their own balance.

Indication

Restricted or limited mobility (e.g.: legs and/or hips) or having balance issues to stand up or walk due to transitional or permanent disabilities

There are no contraindications known when using the product as intended.

The maximum user weight is 135 kg.

10 Assembly (Fig. 3 - 10)



CAUTION!

Risk of Entrapment

- Take care during assembly.
- 1. Fold out legs A on both sides, see Fig 3.



CAUTION!

Risk of Injury

Ensure that all safety clips are correctly assembled.

Adjusting the Seat Height

- The height of the seat can be adjusted between 460 and 610 mm in six steps of 25 mm.
- 1. Remove safety clips (A) from all four legs, see Fig 8.
- 2. Adjust the height ® of the legs, see Fig 8.
- 3. Re-insert safety clips (A) on all four legs, see Fig 8.



WARNING!

Risk of Falling

 Ensure that all legs are adjusted to the same height, see Fig 10.

Fitting the Armrests (Option)

 Drop armrests A into seat plate B on both sides, see Fig 5.



WARNING!

Risk of Injury

 Ensure that both catches © in each armrest audibly engage on the underside of the seat plate, see Fig 5.



CAUTION!

Risk of Entrapment

 Do not put your fingers in open holes at the armrest and below the seat.

Fitting the Backrest (Option)

1. Push backrest frame (A) into the rear openings of seat plate (B) on both sides, see Fig 6.



WARNING!

Risk of Injury

- Ensure that both catches © of the backrest frame audibly engage on the underside of the seat plate, see Fig 6.
- 2. Pull down backrest cover (A) over both sides of the backrest frame, see Fig 7.



WARNING!

Risk of Injury

- 3. Close the backrest bands by pushing latches © into buckles ®, see Fig 7.



WARNING!

Risk of Injury

- Make sure that all buckles are securely closed.
- 4. Tighten the backrest bands, see Fig 9.
 - $\mathring{\underline{\mathbb{I}}}$ Tighten or slacken the bands to adjust the firmness of the backrest cover.

The chair is disassembled in reverse order to assembly.

11 Maintenance

11.1 General Maintenance Information

This product is maintenance-free, provided that the cleaning and disinfection instructions are adhered to.

11.2 Cleaning and Disinfection

General Safety Information



CAUTION!

Risk of Contamination

 Take precautions for yourself and use appropriate protective equipment.

I

IMPORTANT!

Wrong fluids or methods can harm or damage the product.

- All cleaning agents and disinfectants used must be effective, compatible with one another and must protect the materials they are used to clean.
- Never use corrosive fluids (alkalines, acid etc.)
 or abrasive cleaning agents. We recommend
 an ordinary household cleaning agent such as
 dishwashing liquid, if not specified otherwise in
 the cleaning instructions.
- Never use a solvent (cellulose thinner, acetone etc.) that changes the structure of the plastic or dissolves the attached labels.
- Always make sure that the product is completely dried before taking it into use again.
- For cleaning and disinfection in clinical or long-term care environments, follow your in-house procedures.

Cleaning Intervals

IMPORTANT!

Regular cleaning and disinfection enhances smooth operation, increases the service life and prevents contamination.

Clean and disinfect the product

- regularly while it is in use,
- before and after any service procedure,
- when it has been in contact with any body fluids,
- before using it for a new user.

Cleaning Instruction

- Use water and a mild, non-abrasive cleaner to clean the product.
- 2. Dry with a cloth.

Cleaning in a Clinical Environment

- In addition to cleaning as described above we recommend cleaning the product prior to the use by another patient, after ending of the period of use or on a regular basis (depending on which occurs first) at
 - 90 °C for 1 minute
 - 85 °C for 3 minutes
 - 80 °C for 10 minutes



CAUTION!

Risk of Burning Skin

- Allow the product to cool after cleaning.

Cleaning the Backrest Cover

- 1. Remove the backrest cover.
- Machine-wash the cover at max. 60 °C using a mild detergent.

IMPORTANT!Risk of Damage

- Washing at higher temperatures can cause damage.
- Do not tumble dry.

İ

IMPORTANT!

Excessive cleaning can damage the textile.

Disinfection Instructions

Method: Follow the application notes for the used disinfectant and wipe-disinfect all accessible surfaces.

Disinfectant: Ordinary household disinfectant.

Drying: Allow the product to air-dry.

12 Disposal

Be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

Disassemble the product and its components, so the different materials can be separated and recycled individually.

The disposal and recycling of used products and packaging must comply with the laws and regulations for waste handling in each country. Contact your local waste management company for information.

13 Reconditioning

This product is suitable for reuse. To recondition the product for a new user, carry out the following actions:

- Inspection
- Cleaning and disinfection

For detailed information, see 11 Maintenance, page 5.

Make sure that the user manual is handed over with the product.

If any damage or malfunction is detected, do not reuse the product.

14 Technical Data (Fig. 11, 12, 13, 14)

Dimensi	Dimensions (Fig. 11, 12, 13)				
Model	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
A	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460 - 610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm		
D	570 - 600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm		
E	490 - 520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm		
F	850 - 990 mm	655 - 805 mm	460 - 610 mm		
G	440 mm	440 mm	_		
Θ	280 mm	280 mm	_		
①	195 mm	195 mm	_		
①	470 mm	_	_		
K	380 mm	_	_		
(L)	280 mm	_	_		
M	140 mm (if applicable)	140 mm (if applicable)	140 mm (if applicable)		
(N)	170 mm (if applicable)	170 mm (if applicable)	170 mm (if applicable)		
Weight	5.5 kg	4 kg	3.5 kg		

Max. user weight	135 kg

Materials (Fig. 14)				
A	AL	©	PP	
B	PP	D	Nylon / PVC coated	

All product components are corrosion resistant and do not contain natural rubber latex.

15 Environmental Parameters

1			
Operating Conditions			
Ambient temperature	10 - 40 °C		
Relative humidity	15% - 93%, non-condensing		
Storage and Shipping Conditions			
Ambient temperature	0 - 40 °C		
Relative humidity	30% - 75%, non-condensing		

de

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Handhabung des Produkts. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, damit eine sichere Verwendung des Produkts gewährleistet ist

Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Vergewissern Sie sich vor dem Lesen dieses Dokuments, dass Sie die aktuelle Fassung haben. Die jeweils aktuelle Fassung können Sie als PDF-Datei von der Invacare-Website herunterladen.

Wenn die gedruckte Ausführung des Dokuments für Sie aufgrund der Schriftgröße schwer zu lesen ist, können Sie die entsprechende PDF-Version von der Invacare-Website herunterladen. Sie können das PDF-Dokument dann auf dem Bildschirm so anzeigen, dass die Schriftgröße für Sie angenehmer ist.

Bei einem ernsthaften Vorfall mit dem Produkt informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

2 Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

3 Konformität

Qualität ist für das Unternehmen entscheidend. Alle Abläufe sind an den Anforderungen von ISO 13485 ausgerichtet.

Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und erfüllt die europäische Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte der Klasse I. Das Markteinführungsdatum des Produkts ist in der CE-Konformitätserklärung aufgeführt.

Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, die Umwelt durch unsere Unternehmenstätigkeit sowohl direkt vor Ort als auch weltweit möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Wir verwenden ausschließlich REACH-konforme Materialien und Bauteile.

3.1 Produktspezifische Normen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der Norm DIN EN 12182 (Technische Hilfen für behinderte Menschen) sowie den einschlägigen Normen. Weitere Informationen zu lokalen Normen und Vorschriften erhalten Sie bei Ihrem Invacare-Vertreter vor Ort. Die entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

4 Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt drei Jahre, vorausgesetzt, es wird täglich und in Übereinstimmung mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und korrekten Verfahrensweisen verwendet. Die tatsächliche Haltbarkeitsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren.

5 Beschränkung der Haftung

Invacare übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- falscher Verwendung
- normalem Verschleiß
- falscher Montage oder Einrichtung durch den Käufer oder einen Dritten
- technischen Änderungen
- unbefugten Änderungen bzw. Einsatz nicht geeigneter Ersatzteile

6 Sicherheit

6.1 Sicherheitsinformationen



WARNUNG!

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden

Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Falls Ihnen die Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen unverständlich sind, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Anbieter, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt oder optionales Zubehör erst, nachdem Sie diese Anweisungen und mögliches zusätzliches Anweisungsmaterial
 wie die zum Produkt oder optionalen Zubehör gehörende(n) Gebrauchsanweisung, Servicehandbücher oder Merkblätter – vollständig gelesen und verstanden haben.



WARNUNG!

Sturzgefahr

- Defekte Produkte nicht verwenden.
- Keine unbefugten Änderungen am Produkt vornehmen.
- Produkt bei Gebrauch oder unter Belastung nicht bewegen.
- Nicht auf dieses Produkt stellen.
- Das Produkt nicht im Freien verwenden oder lagern.
- Nicht kippen.
- Alle vier Beine müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden. (Abb. 10)
- Alle vier Füße müssen zu jeder Zeit in Kontakt mit dem ebenen Dusch-/Wannenboden befinden.



WARNUNG!

- Das Produkt vor der ersten Verwendung gründlich reinigen.
- Das Produkt vor jeder Verwendung auf Schäden überprüfen und sicherstellen, dass es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr

Teile, die nicht in Original-Qualität vorliegen, oder falsche Teile können die Funktion und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.

- Für das verwendete Produkt ausschließlich Originalteile verwenden.
- Aufgrund regionaler Unterschiede ziehen Sie den Invacare-Katalog oder die Invacare-Website für Ihr Land zurate, um sich über verfügbare Optionen zu informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Invacare-Anbieter. Die entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

6.2 Etiketten und Symbole am Produkt (Abb. 2)

A	Hersteller	F	Medizinprodukt
B	CE-Kennzeichnung	©	Chargennummer
©	Gebrauchsanweisung lesen	Θ	Referenznummer

D	Maximales Benutzergewicht	1	Produktbezeichnung
(E)	Produktionsdatum		

Das Typenschild ist an der Unterseite der Sitzplatte angebracht.

7 Lieferumfang (Abb. 1)

- Sitzplatte mit einklappbaren Beinen
- Armlehne (falls zutreffend) (2×)
- Rückenlehne (falls zutreffend)
- Sicherungsklemmen (4×)
- Gebrauchsanweisung

Der Lieferumfang richtet sich nach der bestellten Ausführung. Die möglichen Ausführungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

Bestimmte Produkte, Modelle und Zubehörteile sind möglicherweise in manchen Ländern nicht erhältlich.

8 Produktbeschreibung

Aquatec Sorrento ist ein Duschhocker/-stuhl mit vier rutschfesten, höhenverstellbaren und einklappbaren Beinen und einem gepolsterten Kunststoffsitz. Das Produkt ist den Anforderungen des Benutzers entsprechend mit oder ohne zwei Armlehnen (gepolstert, abnehmbar) und mit oder ohne Textilrückenlehne und mit oder ohne Hygieneausschnitt in der Sitzplatte verfügbar.

9 Anwendungszweck

Dieses Produkt ist zur Verwendung als Duschhilfe vorgesehen.

Zum vorgesehenen Benutzerkreis zählen Erwachsene und Jugendliche mit Mobilitätseinschränkungen (z. B. Beine und/oder Hüften). Bei Verwendung ohne Begleitperson müssen Benutzer in der Lage sein, das Gleichgewicht zu halten.

Indikation

Mobilitätseinschränkungen (z. B. Beine und/oder Hüften) oder Gleichgewichtsprobleme beim Aufstehen oder Gehen aufgrund vorübergehender oder dauerhafter Behinderungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produkts sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 135 kg.

10 Zusammenbau (Abb. 3 bis 10)



VORSICHT! Einklemmgefahr

Vorsicht bei der Montage.

- 2. Sichern Sie die Beine mit Sicherungsklemmen ® auf allen vier Seiten, siehe Abb. 4.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr

 Stellen Sie sicher, dass alle Sicherungsklemmen korrekt angebracht sind.

Einstellen der Sitzhöhe

Die Höhe des Sitzes kann in sechs Stufen von jeweils 25 mm von 460 bis 610 mm eingestellt werden.

- Stellen Sie die gewünschte Höhe ® der Beine ein, siehe Abb. 8.
- 3. Führen Sie die Sicherungsklemmen (A) an allen vier Beinen wieder ein (siehe Abb. 8).



WARNUNG!

Sturzgefahr

 Stellen Sie sicher, dass bei allen Beinen die gleiche Höhe eingestellt wurde, siehe Abb. 10.

Anbringen der Armlehnen (optional)

1. Setzen Sie die Armlehnen (A) auf beiden Seiten in die Sitzplatte (B) ein, siehe Abb. 5.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

 Stellen Sie sicher, dass in beiden Armlehnen jeweils beide Verriegelungen © an der Unterseite der Sitzplatte hörbar einrasten, siehe Abb. 5.



VORSICHT!

Einklemmgefahr

 Stecken Sie Ihre Finger nicht in die offenen Löcher an den Armlehnen und unterhalb der Sitzplatte.

Anbringen der Rückenlehne (optional)

 Drücken Sie den Rückenlehnenrahmen (A) auf beiden Seiten in die Öffnungen hinten an der Sitzplatte (B), siehe Abb. 6.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass beide Verriegelungen © des Rückenlehnenrahmens an der Unterseite der Sitzplatte hörbar einrasten, siehe Abb. 6.
- 2. Ziehen Sie den Rückenlehnenbezug (A) über beide Seiten des Rückenlehnenrahmens nach unten, siehe Abb. 7.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

- Schließen Sie die Rückenlehnenriemen, indem Sie die Riemenzungen © durch die Schnallen ® führen, siehe Abb. 7.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass alle Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind.
- 4. Ziehen Sie die Rückenlehnenriemen fest, siehe Abb. 9.
 - Ziehen Sie die Riemen fest oder lockern Sie sie, um die Festigkeit des Rückenlehnenbezugs anzupassen.

Die Demontage des Stuhls erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.

11 Instandhaltung

11.1 Allgemeine Hinweise zur Instandhaltung

Für dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die unten aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen beachtet werden.

11.2 Reinigung und Desinfektion

Allgemeine Sicherheitsinformationen



VORSICHT!

Kontaminationsgefahr

 Vorkehrungen für sich selbst treffen und geeignete Schutzausrüstung verwenden.

WICHTIG!

Falsche Reinigungsmethoden oder -flüssigkeiten können zu einer Beschädigung des Produkts führen.

- Alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen wirksam und miteinander kompatibel sein sowie das Material schützen, das mit ihnen gereinigt wird.
- Keinesfalls korrodierende Flüssigkeiten (Laugen, Säuren usw.) oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Wenn in den Reinigungsanweisungen nichts anderes angegeben ist, empfehlen wir ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
- Niemals Lösungsmittel (Nitroverdünnung, Aceton usw.) verwenden, die die Struktur des Kunststoffs verändern oder die angebrachten Etiketten angreifen.
- Immer sicherstellen, dass das Produkt absolut trocken ist, bevor es wieder in Gebrauch genommen wird.
- Zur Reinigung und Desinfektion in Langzeitpflegeumgebungen oder klinischen Umgebungen die internen Verfahren beachten.

Reinigungsintervalle

WICHTIG!

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion sorgen für einen reibungslosen Betrieb, verlängern die Nutzungsdauer und verhindern Verunreinigungen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt

- regelmäßig, sofern es verwendet wird
- vor und nach jeder Wartung
- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- vor Benutzung durch einen neuen Patienten

Reinigungsanweisung

- Reinigen Sie das Produkt mit Wasser und einem milden, nicht scheuernden Reiniger.
- 2. Mit einem Tuch abtrocknen.

Reinigung in einem klinischen Umfeld

- Zusätzlich zu der oben beschriebenen Reinigung empfehlen wir, das Produkt vor dem Gebrauch durch einen anderen Patienten, nach der Anwendungsperiode oder regelmäßig (je nachdem, was früher eintritt) bei
 - 90 °C für 1 Minute
 - 85 °C für 3 Minuten
 - 80 °C für 10 Minuten



VORSICHT!

Gefahr von Hautverbrennungen

 Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen abkühlen.

Reinigung des Rückenlehnenbezugs

- Nehmen Sie den Rückenlehnenbezug ab.
- 2. Waschen Sie den Rückenlehnenbezug bei max. 60 °C mit einem milden Waschmittel in der Waschmaschine.

WICHTIG!

Gefahr von Sachschäden

- Waschen bei höheren Temperaturen kann Beschädigungen zur Folge haben.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.

WICHTIG!

Übermäßige Reinigung kann den Stoff schädigen.

Desinfektionsanweisungen

Methode: Befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen.

Desinfektionsmittel: Haushaltsübliches Desinfektionsmittel

Trocknen: Das Produkt an der Luft trocknen lassen.

12 Entsorgung

Handeln Sie umweltbewusst, und lassen Sie dieses Produkt nach dem Ende seiner Lebensdauer über eine lokale Müllverwertungsanlage recyceln.

Demontieren Sie das Produkt und seine Bauteile, damit die verschiedenen Materialen einzeln getrennt und recycelt werden können.

Die Entsorgung und das Recycling von gebrauchten Produkten und Verpackungen müssen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes zur Abfallentsorgung erfolgen. Wenden Sie sich an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

13 Wiederaufbereitung

Dieses Produkt ist für die wiederholte Verwendung geeignet. Um das Produkt für einen neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Prüfung
- Reinigung und Desinfektion

Detaillierte Informationen siehe 11 Instandhaltung, Seite 9.

Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

Das Produkt darf nicht wiederholt verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen vorliegen.

14 Technische Daten (Abb. 11, 12, 13, 14)

Abmessungen (Abb. 11, 12, 13)					
Modell	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
A	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460–610 mm	460–610 mm	460–610 mm		

(D)	570–600 mm	570–600 mm	570–600 mm
E	490–520 mm	490–520 mm	490–520 mm
F	850–990 mm	655–805 mm	460–610 mm
G	440 mm	440 mm	_
Θ	280 mm	280 mm	_
①	195 mm	195 mm	_
①	470 mm	_	_
K	380 mm	_	_
L	280 mm	_	_
M	140 mm (falls zutreffend)	140 mm (falls zutreffend)	140 mm (falls zutreffend)
(8)	170 mm (falls zutreffend)	170 mm (falls zutreffend)	170 mm (falls zutreffend)
Gewicht	5.5 kg	4 kg	3.5 kg

Max.	135 kg	
Benutzergewicht		

Materialien (Abb. 14)				
A	AL	©	PP	
B	PP	D	Nylon/PVC-beschichtet	

Alle Komponenten des Produkts sind korrosionsbeständig und enthalten kein Naturkautschuklatex.

15 Umweltparameter

Betriebsbedingungen		
Umgebungstemperatur	10 - 40 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % – 93 %, nicht kondensierend	
Transport- und Lagerbedingungen		
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 %, nicht kondensierend	

1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Si la taille des caractères de la version imprimée du document vous semble trop difficile à lire, vous pouvez télécharger la version PDF sur le site Internet. Vous pourrez alors ajuster la taille des caractères à l'écran pour améliorer votre confort visuel.

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

2 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

3 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la norme ISO 13485.

Ce produit porte le label CE et est conforme à la Réglementation sur les dispositifs médicaux de classe l 2017/745. La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration de conformité CE.

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

3.1 Normes spécifiques au produit

Ce produit a été testé et reconnu conforme à la norme EN 12182 (Produits d'assistance pour personnes handicapées) et à toutes les normes associées. Pour des informations complémentaires sur les normes et réglementations locales, contactez un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

4 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de trois ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

5 Limitation de responsabilité

Invacare décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

- un non respect du manuel d'utilisation,
- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers.
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

10 1528666-D

fr

6 Sécurité

6.1 Informations de sécurité



AVERTISSEMENT!

Risque de dommage matériel ou de blessure grave

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé ou un fournisseur avant d'essayer d'utiliser cet équipement.
- N'utilisez pas ce produit ni tout autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris entièrement les présentes instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle que le manuel d'utilisation, les manuels de maintenance ou fiches d'instructions fournis avec ce produit ou l'équipement en option.



AVERTISSEMENT !

Risque de chute

- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux.
- N'effectuez aucune modification ou transformation non autorisées du produit.
- Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est chargé ou en cours d'utilisation.
- Ne vous mettez pas debout sur le produit.
- Le produit ne doit pas être utilisé ni stocké à l'extérieur.
- N'inclinez pas le produit.
- Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur. (Fig. 10)
- Les quatre embouts des pieds doivent toujours être en contact avec le bac à douche/le fond de la baignoire et se trouver sur une surface plane.



AVERTISSEMENT!

- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le produit.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il est correctement monté.



ATTENTION! Risque de blessure

Des pièces non adaptées ou qui ne sont pas d'origine peuvent affecter le fonctionnement et la sécurité du produit.

- Utilisez uniquement les pièces d'origine du produit utilisé.
- En raison de différences régionales, vous devez vous reporter au site Internet ou au catalogue Invacare de votre pays pour connaître les options disponibles; vous pouvez également contacter votre distributeur Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

6.2 Étiquettes et symboles figurant sur le produit (Fig. 2)

A	Fabricant	F	Dispositif médical
B	Conformité européenne	G	Numéro de lot

©	Consultez le manuel d'utilisation	Θ	Numéro de référence
D	Poids maximal de l'utilisateur	1	Désignation du produit
E	Date de production		

L'autocollant d'identification est fixé sur la face intérieure de la plaque d'assise.

7 Contenu (Fig. 1)

- Plaque d'assise avec pieds rabattables
- Accoudoir (le cas échéant) (2x)
- Dossier (le cas échéant)
- Clips de sécurité (4x)
- Manuel d'utilisation

Le contenu dépend de la version commandée. Les versions possibles sont illustrées à la figure 1.

Tous les produits, modèles ou accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays.

8 Description du produit

Aquatec Sorrento est un tabouret / chaise de douche composé de quatre pieds anti-dérapants, réglables en hauteur et pliables et d'un siège en plastique rembourré. Ce produit est disponible avec ou sans deux accoudoirs amovibles rembourrés et avec ou sans dossier textile et avec ou sans découpe d'hygiène sur le siège, selon les besoins des utilisateurs.

9 Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé comme aide à la douche.

Les utilisateurs sont des adultes et des adolescents dont les mouvements sont restreints ou limités (par ex. : jambes et/ou hanches). Sans l'aide d'une tierce-personne, les utilisateurs doivent être en mesure de garder leur équilibre.

Indication

Mouvements restreints ou limités (par ex. : jambes et/ou hanches) ou problèmes d'équilibre pour se lever ou marcher en raison d'un handicap transitoire ou permanent

Il n'existe aucune contre-indication connue, lorsque le produit est utilisé comme prévu.

Le poids maximal de l'utilisateur est de 135 kg.

10 Montage (Fig. 3 - 10)



ATTENTION!

Risque de coincement

- Procédez avec précaution lors du montage.
- 1. Dépliez les pieds A des deux côtés, voir fig. 3.
- 2. Fixez les pieds des quatre côtés à l'aide des clips de sécurité ®, voir fig. 4.



ATTENTION!

Risque de blessure

 Assurez-vous que tous les clips de sécurité sont correctement montés.

Réglage de la hauteur d'assise

La hauteur de l'assise peut être réglée entre 460 et 610 mm, par six paliers de 25 mm.

- 2. Réglez la hauteur ® des pieds, voir fig. 8.
- 3. Replacez les clips de sécurité (A) sur les quatre pieds, voir fig. 8.



AVERTISSEMENT! Risque de chute

 Veillez à ce que tous les pieds soient réglés à la même hauteur, voir fig. 10.

Fixation des accoudoirs (option)

1. Introduisez les accoudoirs (A) de chaque côté de la plaque d'assise (B), voir fig. 5.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure

Veillez à bien entendre les deux butées d'arrêt
 © de chaque accoudoir s'engager dans la partie inférieure de la plaque d'assise, voir fig. 5.



ATTENTION !

Risque de coincement

 Ne placez pas les doigts dans les trous ouverts de l'accoudoir et sous l'assise.

Fixation du dossier (option)

1. Poussez le cadre du dossier (A) dans chacune des ouvertures arrière de la plaque d'assise (B), voir fig. 6.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure

- Veillez à bien entendre les deux butées d'arrêt
 © du cadre du dossier s'engager dans la partie inférieure de la plaque d'assise, voir fig. 6.
- 2. Installez la toile du dossier (A) des deux côtés du cadre du dossier, voir fig. 7.



AVERTISSEMENT! Risque de blessure

- Veillez à ce que les extrémités du cadre du dossier soient correctement positionnées dans les encoches

 à droite et à gauche de la toile du dossier, voir fig. 7.
- 3. Fermez les lanières du dossier en enfonçant les loquets © dans les boucles ®, voir fig. 7.



12

AVERTISSEMENT! Risque de blessure

- Assurez-vous que toutes les boucles sont correctement fermées.
- 4. Serrez les lanières du dossier, voir fig. 9.
 - Serrez ou relâchez les lanières pour ajuster la résistance de la toile du dossier.

Le démontage de la chaise s'effectue dans l'ordre inverse du montage.

11 Maintenance

11.1 Informations de maintenance générales

Aucune maintenance de ce produit n'est nécessaire si les instructions de nettoyage et de désinfection sont respectées.

11.2 Nettoyage et désinfection

Informations de sécurité générales



ATTENTION!

Risque de contamination

 Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et portez un équipement de protection adéquat.

IMPORTANT!

Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.

- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
- N'utilisez jamais de solvant (diluant cellulosique, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.
- Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.
- Pour le nettoyage et la désinfection en environnement clinique ou de soins à long terme, suivez les procédures internes.

Fréquence de nettoyage



IMPORTANT!

Une désinfection et un nettoyage régulier garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination.


Nettoyez et désinfectez le produit

- régulièrement lors de son utilisation,
- avant et après toute procédure d'entretien,
- lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient,
- avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

Consignes de nettoyage

- Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau et un produit nettoyant doux et non abrasif.
- 2. Essuyez la chaise de douche avec un chiffon.

Nettoyage dans un environnement clinique

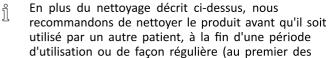

deux termes atteint) à
• 90 °C pendant 1 minute

- 85 °C pendant 3 minutes
- 80 °C pendant 10 minutes
- \wedge

ATTENTION!

Risque de brûlure de la peau

 Laissez le produit sécher entièrement après le nettoyage.

Nettoyage de la toile de dossier

- 1. Retirez la toile de dossier.
- 2. Lavez la toile en machine à une température maximale de 60 °C et avec un détergent doux.

IMPORTANT!

Risque de dommage matériel

- Le lavage à des températures supérieures peut provoquer des dommages.
- Pas de sèche-linge.

IMPORTANT !

Un nettoyage excessif peut endommager le textile.

Instructions de désinfection

Méthode : suivez les consignes d'application du désinfectant utilisé et essuyez toutes les surfaces accessibles pour les désinfecter.

Désinfectant : désinfectant ordinaire à usage domestique.

Séchage : Laissez sécher le produit à l'air.

12 Mise au rebut

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays. Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

13 Reconditionnement

Ce produit peut être réutilisé. Pour reconditionner le produit en vue de son utilisation par un nouvel utilisateur, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- Inspection
- Nettoyage et désinfection

Reportez-vous à la section *11 Maintenance, page 12* pour plus d'informations.

Assurez-vous de remettre le manuel d'utilisation avec le produit.

Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, le produit ne doit pas être réutilisé.

14 Caractéristiques techniques (Fig. 11, 12, 13, 14)

Dimensi	Dimensions (Fig. 11, 12, 13)				
Modèle	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
(A)	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460 - 610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm		
0	570 - 600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm		
E	490 - 520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm		
F	850 - 990 mm	655 - 805 mm	460 - 610 mm		
G	440 mm	440 mm	_		

Θ	280 mm	280 mm	_
①	195 mm	195 mm	_
①	470 mm	_	_
K	380 mm	_	_
(L)	280 mm	_	_
M	140 mm (s'il y a lieu)	140 mm (s'il y a lieu)	140 mm (s'il y a lieu)
N	170 mm (s'il y a lieu)	170 mm (s'il y a lieu)	170 mm (s'il y a lieu)
Poids	5,5 kg	4 kg	3,5 kg

Poids maximal de	135 kg
l'utilisateur	

Matériaux (Fig. 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nylon/enduit PVC

Tous les composants du produit sont résistants à la corrosion et exempts de latex de caoutchouc naturel.

15 Paramètres environnementaux

Conditions de fonctionnement			
Température ambiante	10 °C - 40 °C		
Humidité relative	15 % - 93 %, sans condensation		
Conditions de stockage et de transport			
Température ambiante	0 °C - 40 °C		
Humidité relative	30 % - 75 %, sans condensation		

1 Introduzione

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti sul trattamento del prodotto. Per garantire la sicurezza di utilizzo del prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni di sicurezza.

Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza ulteriore preavviso.

Prima di leggere il presente documento, verificare di essere in possesso dell'ultima versione, disponibile in formato PDF sul sito web Invacare.

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella versione cartacea del documento sia di difficile lettura, è possibile scaricare dal sito web la versione in formato PDF. Il PDF può essere ingrandito sullo schermo in modo da ottenere una dimensione dei caratteri più facile da leggere.

In caso di incidente grave relativo al prodotto, è necessario informare il produttore e l'autorità competente nel proprio paese.

2 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in conformità di quanto indicato sui Termini e le condizioni generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia può essere fatta valere solo attraverso il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

1528666-D 13

it

3 Conformità

La qualità è fondamentale per l'azienda, che opera nel rispetto e nell'ambito della norma ISO 13485.

Il prodotto è dotato di marchio CE, in conformità al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 Classe I. La data di lancio di questo prodotto è indicata nella dichiarazione di conformità CE.

Lavoriamo costantemente per garantire che l'impatto ambientale dell'azienda a livello locale e globale sia ridotto al minimo.

Garantiamo di utilizzare esclusivamente materiali e componenti conformi alla direttiva REACH.

3.1 Standard specifici per il prodotto

Il prodotto è stato testato ed è conforme a EN 12182 (Prodotti di assistenza per disabili) e agli standard correlati. Per ulteriori informazioni sulle norme e sulle disposizioni locali, contattare il rappresentante locale Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del presente documento.

4 Durata

La durata prevista per questo prodotto è di tre anni, a condizione che sia utilizzato quotidianamente e in conformità alle istruzioni per la sicurezza, seguendo gli intervalli di manutenzione e le indicazioni per un uso corretto come indicato nel presente manuale. La durata effettiva può variare a seconda della frequenza e dell'intensità d'uso.

5 Limiti di responsabilità

Invacare non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- Non conformità con il manuale d'uso
- Utilizzo non corretto
- Consumo e usura naturali
- Montaggio o preparazione non corretti da parte dell'acquirente o di terzi
- Modifiche tecniche
- Modifiche non autorizzate e/o utilizzo di pezzi di ricambio non adatti

6 Sicurezza

6.1 Informazioni per la sicurezza



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni gravi o danni

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni o danni.

- In presenza di messaggi di attenzione, precauzioni o istruzioni di difficile comprensione, contattare il personale medico professionale o il fornitore prima di iniziare a utilizzare questo prodotto.
- Non usare questo prodotto o nessun altro dispositivo opzionale disponibile senza prima aver letto attentamente e compreso fino in fondo le presenti istruzioni e ogni altro materiale informativo, come il manuale d'uso, il manuale per la manutenzione o i fogli di istruzione forniti con questo prodotto o con i dispositivi opzionali.



ATTENZIONE!

Pericolo di caduta

- Non utilizzare se difettoso.
- Non apportare alterazioni o modifiche non autorizzate al prodotto.
- Non muovere o spostare il prodotto in presenza di un carico o durante l'uso.
- Non salire in piedi sul prodotto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto all'aperto.
- Non inclinare.
- Tutte e quattro le gambe devono essere regolate alla stessa altezza. (Fig. 10)
- Tutti i quattro puntali delle gambe devono essere sempre a contatto con il pavimento della doccia o della vasca e su una superficie piana.



ATTENZIONE!

- Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente il prodotto.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non abbia subito danni e assicurarsi che sia ben assemblato.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni

Componenti non originali o non corretti possono alterare il funzionamento e la sicurezza del prodotto.

- Utilizzare esclusivamente componenti originali per il prodotto in uso.
- In considerazione delle differenze regionali, fare riferimento al sito web o al catalogo locale di Invacare per le opzioni disponibili oppure contattare il proprio distributore Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del presente documento.

6.2 Etichette e simboli sul prodotto (Fig. 2)

A	Produttore	F	Dispositivo medico
B	Conformità europea	G	Numero di lotto
©	Leggere il manuale d'uso	Θ	Codice di riferimento
D	Peso max. utilizzatore	1	Denominazione del prodotto
E	Data di produzione		

L'etichetta modello è attaccata sul lato inferiore della piastra del sedile.

7 Contenuto della fornitura (Fig. 1)

- Piastra del sedile con gambe pieghevoli
- Bracciolo (se applicabile) (2x)
- Schienale (se presente)
- Fermacavi di sicurezza (4x)
- Manuale d'uso

Il contenuto della fornitura dipende dalla versione ordinata. Le versioni possibili sono indicate nella Figura 1.

È possibile che non tutti i prodotti, i modelli o gli accessori siano disponibili in ogni paese.

8 Descrizione del prodotto

Aquatec Sorrento è una sedia / uno sgabello da doccia con quattro gambe antiscivolo pieghevoli regolabili in altezza e un sedile imbottito in plastica. Il prodotto è disponibile con o senza due braccioli rimovibili imbottiti, con o senza schienale in tessuto e con o senza apertura igienica sul sedile, a seconda delle disposizioni dell'utilizzatore.

9 Uso previsto

Il presente prodotto è destinato all'uso come ausilio per la doccia

Gli utilizzatori sono adulti e adolescenti con mobilità ridotta o limitata (ad esempio, gambe e/o fianchi). Se utilizzato senza assistente, gli utilizzatore devono essere in grado di mantenere l'equilibrio.

Indicazione

Mobilità ridotta o limitata (ad esempio: gambe e/o fianchi) o problemi di equilibrio quando ci si alza o si cammina a causa di disabilità transitorie o permanenti

Se si utilizza il prodotto come previsto, non sono note controindicazioni.

Il peso utilizzatore massimo è di 135 kg.

10 Montaggio (Figg. 3 - 10)



AVVERTENZA!

Rischio di intrappolamento

- Prestare attenzione durante il montaggio.
- 2. Fissare le gambe mediante i fermi di sicurezza ® su tutti e quattro i lati, vedere Fig 4.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni

 Assicurarsi che tutti i fermi di sicurezza siano montati correttamente.

Regolazione dell'altezza del sedile

- L'altezza del sedile può essere regolata tra 460 e 610 mm in sei passi da 25 mm.
- 1. Rimuovere i fermi di sicurezza (A) da tutte e quattro le gambe, vedere Fig 8.
- 2. Regolare l'altezza ® delle gambe, vedere Fig 8.
- 3. Inserire nuovamente i fermacavi di sicurezza (A) su tutte e quattro le gambe. Vedere Fig 8.



ATTENZIONE!

Pericolo di caduta

 Assicurarsi che tutte le gambe siano regolate alla stessa altezza, vedere Fig. 10.

Montaggio dei braccioli (opzionali)

 Inserire i braccioli (A) nella piastra del sedile (B) su entrambi i lati, vedere Fig 5.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

 Assicurarsi che entrambi i fermi © di ciascun bracciolo siano inseriti a scatto al di sotto della piastra del sedile, vedere Fig. 5.



AVVERTENZA!

Rischio di intrappolamento

 Non inserire le dita nei fori aperti in corrispondenza del bracciolo e sotto il sedile.

Montaggio dello schienale (opzionale)

1. Spingere il telaio dello schienale (A) nelle aperture posteriori della piastra del sedile (B) su entrambi i lati, vedere Fig 6.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

- Assicurarsi che entrambi i fermi © del telaio dello schienale siano inseriti a scatto al di sotto della piastra del sedile, vedere Fig. 6.
- 2. Tirare verso il basso il rivestimento dello schienale & su entrambi i lati del telaio dello schienale, vedere Fig 7.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

- Chiudere le cinghie dello schienale inserendo gli elementi di fissaggio © nelle fibbie ®, vedere Fig 7.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

- Assicurarsi che tutte le fibbie siano chiuse saldamente.
- 4. Stringere le cinghie dello schienale, vedere Fig 9.
 - Stringere o allentare le cinghie per regolare la rigidità del rivestimento dello schienale.

La sedia viene smontata eseguendo la procedura di montaggio nell'ordine inverso.

11 Manutenzione

11.1 Informazioni generali per la manutenzione

Questo prodotto non richiede manutenzione, a condizione che siano rispettate le istruzioni di pulizia e di disinfezione descritte di seguito.

11.2 Pulizia e disinfezione

Informazioni generali sulla sicurezza



AVVERTENZA!

Rischio di contaminazione

 Adottare opportune precauzioni per la propria protezione e utilizzare un'attrezzatura protettiva adeguata.

IMPORTANTE!

Liquidi inappropriati o metodi errati potrebbero danneggiare il prodotto.

- Tutti i prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati devono essere efficaci e compatibili tra loro e devono proteggere i materiali su cui vengono utilizzati durante la pulizia.
- Non utilizzare mai liquidi corrosivi (sostanze alcaline, acidi, ecc.) o detergenti abrasivi. Si consiglia di utilizzare un normale prodotto detergente per la casa, come un detersivo liquido per i piatti, a meno che non siano state fornite indicazioni diverse nelle istruzioni di pulizia.
- Non utilizzare mai solventi (diluente per cellulosa, acetone, ecc.) che modificano la struttura della plastica o che sciolgono le etichette applicate.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi sempre che sia completamente asciutto.
- Per la pulizia e la disinfezione in ambienti clinici o di assistenza a lungo termine, seguire le procedure interne della struttura.

Intervalli di pulizia

IMPORTANTE!

La pulizia e la disinfezione regolari consentono di assicurare il regolare e buon funzionamento, aumentare la durata e prevenire la contaminazione. Pulire e disinfettare regolarmente il prodotto.

- durante l'uso,
- prima e dopo qualsiasi procedura di manutenzione,
- in caso di contatto con liquidi biologici,
- prima dell'uso per un nuovo utilizzatore.

Istruzioni per la pulizia

- Per pulire il prodotto, utilizzare acqua e un detergente delicato e non abrasivo.
- 2. Asciugare con un panno.

Effettuare la pulizia in ambiente clinico

- Oltre alle istruzioni per la pulizia fornite in precedenza, raccomandiamo di pulire il prodotto prima dell'uso da parte di un altro paziente, al termine del periodo d'uso o regolarmente (a seconda di quale evenienza si verifichi per prima) a
 - 90 °C per 1 minuto
 - 85 °C per 3 minuti
 - 80 °C per 10 minuti



16

AVVERTENZA!

Rischio di ustioni della pelle

- Dopo la pulizia, lasciare raffreddare il prodotto.

Pulizia del rivestimento dello schienale

- 1. Togliere il rivestimento dello schienale.
- 2. Lavare il rivestimento in lavatrice con detergente delicato a una temperatura massima di 60 °C.

IMPORTANTE! • Rischio di danni

- Un lavaggio a temperature più elevate può provocare danni.
- Non mettere nell'asciugabiancheria.

■ IMPORTANTE!

I lavaggi eccessi possono danneggiare il tessuto.

Istruzioni per la disinfezione

Metodo: Seguire le note applicative per il disinfettante utilizzato e disinfettare con una salvietta tutte le superfici accessibili.

Disinfettante: normale disinfettante per la casa.

Asciugatura: Lasciare asciugare il prodotto all'aria.

12 Smaltimento

Rispettare l'ambiente e riciclare il prodotto attraverso un centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

Smontare il prodotto e i relativi componenti, in modo che i differenti materiali possano essere staccati e riciclati singolarmente.

Lo smaltimento e il riciclaggio dei prodotti usati e degli imballaggi devono essere eseguiti nel rispetto delle leggi e delle normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, contattare la propria azienda di raccolta rifiuti locale.

13 Ricondizionamento

Questo prodotto è adatto per il riutilizzo. Per il ricondizionamento del prodotto per un nuovo utilizzatore, intraprendere le azioni seguenti:

- Ispezione
- Pulizia e disinfezione

Per ulteriori informazioni, consultare 11 Manutenzione, pagina 15.

Assicurarsi che il manuale d'uso venga sempre consegnato insieme al prodotto.

Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, non riutilizzare il prodotto.

14 Dati tecnici (Fig. 11, 12, 13, 14)

Dimensi	Dimensioni (Fig. 11, 12, 13)				
Modello	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
A	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460 - 610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm		
0	570 - 600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm		
E	490 - 520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm		
F	850 - 990 mm	655 - 805 mm	460 - 610 mm		
G	440 mm	440 mm	_		
Θ	280 mm	280 mm	_		
1	195 mm	195 mm	_		
①	470 mm	_	_		
K	380 mm	_	_		
L	280 mm	_	_		
M	140 mm (se applicabile)	140 mm (se applicabile)	140 mm (se applicabile)		
(8)	170 mm (se applicabile)	170 mm (se applicabile)	170 mm (se applicabile)		
Peso	5,5 kg	4 kg	3,5 kg		

Peso max.	135 kg
utilizzatore	

Mate	eriali (Fig. 14)		
A	AL	©	PP
B	PP	D	Rivestito in nylon/PVC

Tutti i componenti del prodotto sono resistenti alla corrosione e non contengono lattice di gomma naturale.

15 Parametri ambientali

Condizioni di funzionamento		
Temperatura ambiente	10 - 40 °C	
Umidità relativa	15% - 93% non condensante	
Condizioni di conservazione e di trasporto:		
Temperatura ambiente	0 - 40 °C	
Umidità relativa	30% - 75% non condensante	

es

1 Introducción

Este manual del usuario contiene información importante sobre el manejo del producto. Para garantizar su seguridad al utilizar el producto, lea detenidamente el manual del usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Invacare se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Antes de leer este documento, asegúrese de contar con la versión más reciente. Podrá encontrarla en formato PDF en el sitio web de Invacare.

Si la versión impresa del documento tiene un tamaño de letra que le resulta difícil de leer, podrá descargarlo en formato PDF en el sitio web. Podrá ampliar el PDF en pantalla a un tamaño de letra que le resulte más cómodo.

En caso de un accidente grave con el producto, informe al fabricante y a las autoridades competentes de su país.

2 Información sobre la garantía

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales en los distintos países.

Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

3 Cumplimiento

La calidad es fundamental para el funcionamiento de nuestra empresa, que trabaja conforme a las normas ISO 13485.

Este producto lleva la marca CE, en cumplimiento con el Reglamento 2017/745 sobre productos sanitarios de clase 1. La fecha de lanzamiento de este producto figura en la declaración de conformidad de la CE.

Trabajamos continuamente para garantizar que se reduzca al mínimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto a nivel local como global.

Solo utilizamos materiales y componentes que cumplen con las directivas REACH.

3.1 Normas específicas del producto

El producto ha sido sometido a pruebas y cumple la norma EN 12182 (Ayudas técnicas para personas con discapacidad) y las normas relacionadas. Para obtener más información sobre las normativas locales, póngase en contacto con el representante local de Invacare. Consulte las direcciones al final de este documento.

4 Vida útil

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

5 Limitación de responsabilidad

Invacare no se hace responsable de los daños surgidos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros
- Modificaciones técnicas
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados

6 Seguridad

6.1 Información de seguridad



iADVERTENCIA!

Riesgo de daños o lesiones graves

Un uso incorrecto de este producto puede provocar lesiones o daños.

- Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario o con su proveedor antes de intentar utilizar este equipo.
- No utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como el manual del usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones proporcionados con este producto o equipo opcional.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de caída

- No utilice el producto si está defectuoso.
- No realice modificaciones ni alteraciones no autorizadas en el producto.
- No mueva ni desplace el producto si está cargado o mientras se usa.
- No ponerse de pie sobre este producto.
- No utilice ni almacene el producto en exteriores.
- No lo incline.
- Las cuatro patas deben ajustarse a la misma altura. (Fig. 10)
- Las cuatro conteras de las patas deben estar en contacto con el suelo de la ducha / bañera en todo momento y sobre una superficie nivelada.



¡ADVERTENCIA!

- Antes de utilizarlo por primera vez, limpie a fondo el producto.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto no esté dañado y asegúrese de que esté montado de forma segura.



¡PRECAUCIÓN! Riesgo de lesiones

El uso de piezas incorrectas o que no sean originales puede afectar el funcionamiento y la seguridad del producto.

- Utilice solo piezas originales para usar el producto.
- Dadas las diferencias regionales existentes, consulte en el catálogo o en el sitio web de Invacare las opciones disponibles o póngase en contacto con su distribuidor de Invacare. Consulte las direcciones que figuran al final de este documento.

6.2 Etiquetas y símbolos del producto (Fig. 2)

A	Fabricante	F	Producto sanitario
B	Conformidad europea	G	Número de lote
©	Lea el manual del usuario	Θ	Referencia de producto
D	Peso del usuario máximo	1)	Nombre del producto
E	Fecha de fabricación		

 $\frac{\circ}{1}$ La etiqueta de identificación está fijada en la parte inferior de la placa del asiento.

7 Contenido de la entrega (Fig. 1)

- Placa de asiento con patas plegables
- Reposabrazos (2x) (si procede)
- Respaldo (si procede)
- Horquillas de seguridad (4x)
- Manual del usuario

El contenido de la entrega depende de la versión pedida. Las posibles versiones se muestran en la figura 1.

Es posible que no todos los productos, modelos o accesorios estén disponibles en todos los países.

8 Descripción del producto

Aquatec Sorrento es un taburete/silla de ducha con cuatro patas antideslizantes, plegables y ajustables en altura y un asiento de plástico acolchado. El producto está disponible con o sin dos reposabrazos acolchados desmontables y con o sin respaldo textil y con o sin acceso higiénico en el asiento, en función de los requisitos del usuario.

9 Uso previsto

Este producto ha sido diseñado para su uso como ayuda en duchas.

Está destinado a usuarios adultos y adolescentes con movilidad reducida o limitada (por ejemplo: piernas y/o caderas). Si se utiliza sin un ayudante, los usuarios deben ser capaces de mantener el equilibrio.

Indicación

Movilidad restringida o limitada (p. ej.: piernas o caderas) o problemas de equilibrio para ponerse en pie o caminar debido a discapacidades transitorias o permanentes.

No existen contraindicaciones conocidas cuando el producto se utiliza del modo previsto.

El peso máximo del usuario es de 135 kg.

10 Montaje (Fig. 3 - 10)



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de atrapamiento

- Tenga cuidado durante el montaje.
- 1. Despliegue las patas A a ambos lados, véase la Fig. 3.
- 2. Asegure las patas en los cuatro lados con horquillas de seguridad ®, véase la Fig. 4. C.




¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de lesiones

 Asegúrese de que todas las horquillas de seguridad están montadas correctamente.

Ajuste de la altura del asiento

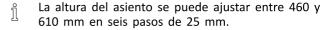

- 2. Ajuste la altura ® de las patas, véase la Fig. 8.
- 3. Vuelva a colocar las horquillas de seguridad (A) en las cuatro patas, véase la Fig. 8.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de caída

 Asegúrese de que todas las patas estén ajustadas a la misma altura, véase la Fig. 10.

Montaje de los reposabrazos (opcional)

1. Coloque los reposabrazos (A) en la placa del asiento (B) en ambos lados, véase la Fig. 5.



iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

 Compruebe que los dos cierres © de cada reposabrazos encajan de forma audible en la parte inferior de la placa del asiento, véase la Fig. 5.



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de atrapamiento

 Tenga cuidado de no colocar los dedos en los orificios abiertos del reposabrazos y debajo del asiento.

Montaje del respaldo (opcional)

1. Presione el chasis del respaldo (A) para insertarlo en las aperturas posteriores de la placa del asiento (B) en ambos lados, véase la Fig. 6.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

 Compruebe que los dos cierres © del chasis del respaldo encajan de forma audible en la parte inferior de la placa del asiento, véase la Fig. 6.

2. Empuje hacia abajo la funda del respaldo (A) a ambos lados del chasis del respaldo, véase la Fig. 7.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

- 3. Asegure las tiras del respaldo encajando los pasadores © en las hebillas ®, véase la Fig. 7.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

- Asegúrese de que todas las hebillas estén bien cerradas.
- 4. Apriete las tiras del respaldo, véase la Fig. 9.
 - $\frac{\circ}{\parallel}$ Apriete o afloje las tiras para ajustar la firmeza de la funda del respaldo.

La silla se desmonta siguiendo el procedimiento de montaje en orden inverso.

11 Mantenimiento

11.1 Información sobre mantenimiento general

Este producto no precisa ningún mantenimiento, siempre que se sigan las instrucciones de limpieza y desinfección.

11.2 Limpieza y desinfección

Información general de seguridad



iPRECAUCIÓN!

Riesgo de contaminación

 Adopte las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección adecuado.

IMPORTANTE

Seguir métodos erróneos o utilizar fluidos incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

- Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben proteger los materiales que se van a limpiar.
- Nunca utilice fluidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.
 Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas, si no especifica lo contrario en las instrucciones de limpieza.
- No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.
- Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.
- Para la limpieza y desinfección en entornos clínicos o de atención sanitaria a largo plazo, siga los procedimientos internos.

Intervalos de limpieza

IMPORTANTE

La limpieza y la desinfección habituales mejoran el correcto funcionamiento, aumentan la vida útil y evitan la contaminación.

Limpie y desinfecte el producto

- periódicamente mientras esté en uso,
- antes y después de cualquier procedimiento de mantenimiento,
- cuando haya estado en contacto con fluidos corporales,
- antes de usarlo con un nuevo usuario.

Instrucciones de limpieza

- Use agua y un detergente suave no abrasivo para limpiar el producto.
- 2. Seque con un paño.

Limpieza en un entorno clínico

- Además del procedimiento de limpieza descrito anteriormente, recomendamos limpiar el producto antes de su uso por parte de otro paciente, tras finalizar el periodo de uso o con frecuencia (según lo que ocurra primero)
 - A 90 °C durante 1 minuto
 - A 85 °C durante 3 minutos
 - A 80 °C durante 10 minutos



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de quemaduras en la piel

– Deje que el producto se enfríe tras la limpieza.

Limpieza de la funda del respaldo

- L. Quite la funda del respaldo.
- 2. Lave la funda en lavadora a una temperatura máxima de 60 °C con un detergente suave.

IMPORTANTE Riesgo de daños

- El lavado a temperaturas más altas puede provocar daños.
- No secar en la secadora.

ļ

IMPORTANTE

Una limpieza excesiva puede dañar el tejido.

Instrucciones de desinfección

Método: Siga las instrucciones de aplicación del desinfectante y limpie y desinfecte todas las superficies accesibles.

Desinfectante: Desinfectante doméstico habitual.

Secado: Deje que el producto se seque al aire.

12 Eliminación

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

13 Reacondicionamiento

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- · Limpieza y desinfección

Para obtener información detallada, consulte 11 Mantenimiento, página 19.

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

14 Datos técnicos (Fig. 11, 12, 13, 14)

Dimensi	Dimensiones (Fig. 11, 12, 13)				
Modelo	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
(A)	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	De 460 mm a 610 mm	De 460 mm a 610 mm	De 460 mm a 610 mm		
D	De 570 mm a 600 mm	De 570 mm a 600 mm	De 570 mm a 600 mm		
E	De 490 mm a 520 mm	De 490 mm a 520 mm	De 490 mm a 520 mm		
F	De 850 mm a 990 mm	De 655 mm a 805 mm	De 460 mm a 610 mm		
G	440 mm	440 mm	_		
Θ	280 mm	280 mm	_		
①	195 mm	195 mm	_		
①	470 mm	_	_		
K	380 mm	_	_		
(L)	280 mm	_	_		
M	140 mm (si procede)	140 mm (si procede)	140 mm (si procede)		
(N)	170 mm (si procede)	170 mm (si procede)	170 mm (si procede)		
Peso	5,5 kg	4 kg	3,5 kg		

Peso máximo del 135 kg usuario

Materiales (Fig. 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nailon/revestimiento de PVC

Todos los componentes del producto son resistentes a la corrosión y no contienen látex de caucho natural.

15 Parámetros medioambientales

20

Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	De 10 a 40 °C

Humedad relativa	Del 15 % al 93 % sin condensación
Condiciones de envío y alma	cenamiento
Temperatura ambiente	De 0 a 40 °C
Humedad relativa	Del 30 % al 75 % sin condensación

1 Introdução

Este manual de utilização contém informações importantes sobre o manuseamento do produto. Para garantir a segurança durante a utilização do produto, leia atentamente o manual de utilização e siga as instruções de segurança.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Antes de ler este documento, certifique-se de que tem a versão mais recente. A versão mais recente está disponível no site da Invacare, em formato PDF.

Se o tamanho do tipo de letra no documento impresso for difícil de ler, pode transferir uma versão em PDF do manual a partir do site. A imagem do PDF pode ser ajustada no ecrã para um tamanho de tipo de letra que lhe seja mais cómodo.

Em caso de incidente grave com o produto, deve informar o fabricante e as autoridades competentes do seu país.

2 Informações da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em conformidade com os nossos Termos e Condições Gerais de Compra nos respetivos países.

As reclamações de garantia só podem ser realizadas através do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

3 Conformidade

A qualidade é fundamental para o funcionamento da empresa, estando em conformidade com a norma ISO 13485.

Este produto apresenta a marca CE, em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos 2017/745, Classe I. A data de lançamento deste produto é indicada na declaração de conformidade da CE.

Temos empreendido um esforço contínuo para reduzir ao mínimo o impacto local e global da empresa no ambiente.

Apenas utilizamos materiais e componentes que cumprem a diretiva REACH.

3.1 Normas específicas do produto

O produto foi testado e está em conformidade com a norma EN 12182 (Produtos de assistência para pessoas com deficiências) e normas relacionadas. Para obter informações adicionais sobre as normas e os regulamentos locais, contacte o representante local da Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

4 Vida útil

A vida útil prevista deste produto é de três anos, quando o mesmo é utilizado diariamente e em conformidade com as instruções de segurança, intervalos de manutenção e utilização correcta indicados neste manual. A vida útil efectiva pode variar de acordo com a frequência e intensidade de utilização.

pt

5 Limitação de responsabilidade

A Invacare não aceita a responsabilidade por danos decorrentes de:

- Incumprimento das instruções presentes no manual de utilização
- Utilização incorreta
- Desgaste natural devido ao uso
- Montagem ou preparação incorreta pelo comprador ou por terceiros
- Modificações técnicas
- Modificações não autorizadas e/ou utilização de peças sobressalentes desadequadas

6 Segurança

6.1 Informações de segurança



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesão grave ou danos

A utilização incorreta deste produto pode causar lesões ou danos.

- Se não compreender as advertências, avisos ou instruções, contacte um profissional de cuidados de saúde ou o fornecedor antes de tentar utilizar este equipamento.
- Não utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem primeiro ler e compreender estas instruções e todo o material de instrução adicional, assim como os manuais de utilização, os manuais de assistência ou os folhetos de instruções fornecidos com este produto ou com equipamento opcional.



ADVERTÊNCIA! Risco de queda

- Não utilizar se apresentar defeitos.
- Não fazer quaisquer modificações nem alterações não autorizadas ao produto.
- Não deslocar nem mudar a localização do produto se tiver alguma carga ou quando estiver a ser utilizado.
- Não se coloque de pé em cima deste produto.
- Não utilize nem armazene o produto no exterior.
- Não se incline.
- As quatro pernas têm de estar ajustadas à mesma altura. (Fig. 10)
- As quatro extremidades das pernas devem estar permanentemente em contacto com a superfície do chuveiro/banheira e numa superfície plana.



ADVERTÊNCIA!

- Antes da primeira utilização, limpe rigorosamente o produto.
- Antes de cada utilização, verifique o produto, procurando sinais de danos e assegurando que está montado de forma segura.



ATENÇÃO! Risco de lesões

Peças não originais ou incorretas podem afetar o funcionamento e a segurança do produto.

- Utilize apenas peças originais para o produto em utilização.
- Devido a diferenças regionais, consulte o catálogo ou o site local da Invacare relativamente às opções disponíveis ou contacte o seu distribuidor Invacare. Consulte os endereços no final deste documento.

6.2 Etiquetas e símbolos no produto (Fig. 2)

A	Fabricante	F	Dispositivo médico
B	Conformidade Europeia	G	Número de lote
©	Ler o manual de utilização	Θ	Número de referência
D	Peso máximo do utilizador	1	Designação do produto
E	Data de produção		

A placa de características encontra-se fixada por baixo da placa de assento.

7 Material incluído na entrega (Fig. 1)

- Placa de assento com pernas rebatíveis
- Apoio de braço (se aplicável) (2x)
- Encosto (se aplicável)
- Clipes de segurança (4x)
- Manual de utilização

O material incluído na entrega depende da versão encomendada. As versões possíveis são apresentadas na figura 1.



Nem todos os produtos, modelos ou acessórios podem estar disponíveis em todos os países.

8 Descrição do produto

O produto Aquatec Sorrento é um banco/cadeira de duche com quatro pernas antiderrapantes, de altura ajustável e rebatíveis, e um assento de plástico almofadado. O produto está disponível com ou sem dois apoios de braços removíveis almofadados, com ou sem um encosto têxtil e com ou sem o recorte de acesso higiénico no assento, consoante os requisitos do utilizador.

9 Utilização prevista

Este produto destina-se a ser utilizado como um acessório de duche.

Os utilizadores previstos são adultos e adolescentes com mobilidade restrita ou limitada (por exemplo, pernas e/ou ancas). Se for utilizado sem um assistente, os utilizadores devem ser capazes de manter o equilíbrio.

Indicação

Mobilidade restrita ou limitada (por exemplo, pernas e/ou ancas) ou problemas de equilíbrio ao pôr-se de pé ou caminhar devido a incapacidades transitórias ou permanentes.

Não existem nenhumas contraindicações conhecidas quando o produto é utilizado da forma prevista.

O peso máximo do utilizador é 135 kg.

10 Montagem (Fig. 3 - 10)



ATENÇÃO!

Risco de apresamento

- Tenha cuidado durante a montagem.
- 2. Fixe as pernas com clipes de segurança ® nos quatro lados. Consulte a Fig. 4.



ATENÇÃO!

Risco de lesões

 Certifique-se de que todos os clipes de segurança estão montados corretamente.

Ajustar a altura do assento

- $^{\circ}$ A altura do assento pode ser ajustada entre 460 e 610 mm em seis passos de 25 mm.
- 2. Ajuste a altura ® das pernas. Consulte a Fig. 8.
- 3. Volte a inserir os clipes de segurança (A) nas quatro pernas. Consulte a Fig. 8.



ADVERTÊNCIA!

Risco de queda

 Certifique-se de que as quatro pernas ficam ajustadas à mesma altura. Consulte a Fig. 10.

Encaixar os apoios de braços (opcional)



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesões

 Assegure que os dois fechos © em cada apoio de braço ficam engatados na parte inferior da placa de assento, emitindo um estalido. Consulte a Fig. 5.



ATENÇÃO!

Risco de apresamento

 Não coloque os dedos nos orifícios abertos no apoio de braço e por baixo do assento.

Encaixar o encosto (opcional)

1. Empurre a estrutura do encosto (A) no sentido das aberturas posteriores da placa de assento (B) em ambos os lados. Consulte a Fig. 6.



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesões

- Assegure que os dois fechos © da estrutura do encosto engatam na parte inferior da placa de assento, emitindo um estalido. Consulte a Fig.
- 2. Puxe a capa do encosto (A) para baixo sobre ambos os lados da estrutura do encosto. Consulte a Fig. 7.



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesões

Assegure que as extremidades da estrutura do encosto estão bem localizadas nas reentrâncias
D dos lados esquerdo e direito da capa do encosto. Consulte a Fig. 7. 3. Prenda as faixas do encosto inserindo os fechos © nas fivelas B. Consulte a Fig. 7.



ADVERTÊNCIA!

Risco de lesões

- Certifique-se que todas as fivelas estão bem fechadas.
- 4. Aperte as faixas do encosto. Consulte a Fig. 9.
 - $\frac{\circ}{1}$ Aperte ou solte as faixas para ajustar a firmeza da capa do encosto.

Para desmontar a cadeira, inverta a ordem de montagem.

11 Manutenção

11.1 Informações gerais sobre manutenção

Se as instruções de limpeza e desinfeção forem cumpridas, este produto não necessita de manutenção.

11.2 Limpeza e desinfeção

Informações gerais de segurança



ATENÇÃO!

Risco de contaminação

 Tome precauções pessoais e utilize equipamento de proteção apropriado.

IMPORTANTE!

Métodos ou fluidos errados podem prejudicar ou danificar o produto.

- Todos os agentes de limpeza e desinfetantes utilizados devem ser eficazes, compatíveis entre si e passíveis de proteger os materiais aos quais são aplicados para limpeza.
- Nunca utilize líquidos corrosivos (alcalinos, ácidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos.
 Recomendamos um agente de limpeza doméstico normal, como detergente da loiça, se não houver especificações em contrário nas instruções de limpeza.
- Nunca utilize um solvente (diluente celulósico, acetona, etc.) que altere a estrutura do plástico ou dissolva as etiquetas afixadas.
- Certifique-se sempre de que o produto está completamente seco antes de o pôr novamente em funcionamento.
- Para a limpeza e desinfeção em ambientes de cuidados clínicos ou de longa duração, siga os procedimentos internos.

Intervalos de limpeza

IMPORTANTE!

A limpeza e a desinfeção regulares melhoram o funcionamento correto, aumentam a vida útil e evitam a contaminação.

Limpe e desinfete o produto

- regularmente enquanto está a ser utilizado,
- antes e depois de qualquer operação de assistência,
- depois de ter estado em contacto com quaisquer fluidos corporais
- e antes da sua utilização por um novo utilizador.

Instrução de limpeza

- Utilize água e um produto de limpeza suave e não abrasivo para limpar o produto.
- 2. Seque com um pano.

Limpar num ambiente clínico

- Além do procedimento de limpeza descrito antes, recomendamos a limpeza do produto antes de ser utilizado por outro paciente, no final do período de utilização ou numa base regular (dependendo do que ocorrer primeiro) a
 - 90 °C durante 1 minuto
 - 85 °C durante 3 minutos
 - 80 °C durante 10 minutos



ATENÇÃO!

Risco de queimaduras na pele

- Deixe o produto arrefecer após a limpeza.

Limpar a capa do encosto

- 1. Remova da capa do encosto.
- Lave a capa na máquina a uma temperatura máxima de 60 °C, usando um detergente suave.

IMPORTANTE! Risco de danos

- A lavagem a temperaturas mais elevadas pode causar danos.
- Não secar à máquina.

ļ

IMPORTANTE!

A limpeza excessiva pode danificar os têxteis.

Instruções de desinfeção

Método: Siga as notas de aplicação para o desinfetante utilizado e desinfete todas as superfícies acessíveis com toalhetes.

Desinfetante: Desinfetante doméstico comum.

Secar: Deixe o produto secar ao ar.

12 Eliminação

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da respetiva vida útil através das instalações de reciclagem existentes.

Desmonte o produto e os seus componentes, para que os diferentes materiais possam ser separados e reciclados individualmente.

A eliminação e a reciclagem de produtos utilizados e da embalagem devem cumprir as leis e os regulamentos relativos à gestão de resíduos de cada país. Para obter informações, contacte a empresa de gestão de resíduos local.

13 Recondicionamento

Este produto é adequado para reutilização. Para o recondicionamento do produto para um novo utilizador, execute as seguintes ações:

- Inspeção
- Limpeza e desinfeção

Para obter informações detalhadas, consulte a secção 11 Manutenção, página 22.

Certifique-se de que o manual de utilização é fornecido com o produto.

Se forem detetados danos ou avarias, não reutilize o produto.

14 Dados técnicos (Fig. 11, 12, 13, 14)

Dimensô	Dimensões (Fig. 11, 12, 13)				
Modelo	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
A	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460 - 610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm		
D	570 - 600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm		
E	490 - 520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm		
F	850 - 990 mm	655 - 805 mm	460 - 610 mm		
G	440 mm	440 mm	_		
Θ	280 mm	280 mm	_		
①	195 mm	195 mm	_		
①	470 mm	_	_		
K	380 mm	_	_		
(L)	280 mm	_	_		
M	140 mm (se aplicável)	140 mm (se aplicável)	140 mm (se aplicável)		
N	170 mm (se aplicável)	170 mm (se aplicável)	170 mm (se aplicável)		
Peso	5,5 kg	4 kg	3,5 kg		

Peso máximo do 135 kg utilizador

Ma	Materiais (Fig. 14)		
A	AL	©	PP (polipropileno)
B	PP (polipropileno)	D	Nylon/revestido com PVC

Todos os componentes do produto são resistentes à corrosão e não contêm látex de borracha natural.

15 Parâmetros ambientais

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	10 - 40 °C	
Humidade relativa	15% - 93%, sem condensação	
Condições de transporte e armazenamento		
Temperatura ambiente 0 - 40 °C		
Humidade relativa	30% - 75%, sem condensação	

nl

1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de juiste versie hebt. U vindt een pdf-bestand met de laatste versie op de Invacare-website.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u een pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

2 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

3 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merkteken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse I. De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-conformiteitsverklaring.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

3.1 Productspecifieke normen

Het product is getest en voldoet aan de norm EN 12182 (producten ter ondersteuning van personen met een handicap) en alle bijbehorende normen. Neem voor meer informatie over de lokale normen en voorschriften contact op met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

4 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is drie jaar bij dagelijks gebruik en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

5 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik
- Normale slijtage
- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen
- Niet-geautoriseerde wijzigingen en/of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen

6 Veiligheid

6.1 Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of schade

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamelijk letsel.

- Als u de waarschuwingen, aanwijzingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met een professionele zorgverlener of leverancier voordat u dit hulpmiddel gebruikt.
- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur alleen als u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, met inbegrip van de gebruikershandleiding, servicehandleidingen of instructiebladen die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt.



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

- Niet gebruiken indien defect.
- Voer geen niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen uit op het product.
- Het product tijdens gebruik of bij belasting niet verplaatsen.
- Niet op dit product staan.
- Het product mag niet buiten worden gebruikt of bewaard.
- Niet kantelen.
- Alle vier de poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld. (afb. 10).
- De vier pootuiteinden moeten te allen tijde in contact blijven met een vlakke ondergrond in de douche of het bad.



WAARSCHUWING!

- Vóór het eerste gebruik moet het product grondig worden gereinigd.
- Controleer het product vóór elk gebruik op schade en controleer of het stevig is gemonteerd.



LET OP!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Niet-originele of verkeerde onderdelen kunnen de werking en veiligheid van het product nadelig beïnvloeden.

- Gebruik alleen originele onderdelen voor het product dat u gebruikt.
- Vanwege de verschillen per regio kunt u het beste de Invacare-catalogus of -website voor uw regio raadplegen om te zien welke opties beschikbaar zijn. U kunt ook contact opnemen met uw Invacare-leverancier. Zie de adressen achter in dit document.

6.2 Labels en symbolen op het product (afb. 2)

A	Fabrikant	F	Medisch hulpmiddel
B	Conformiteit met Europese normen	G	Serienummer
©	Lees de gebruikershandleiding	Θ	Referentienummer

D	Maximaal gebruikersgewicht	1	Productaanduiding
(E)	Productiedatum		

De identificatie is aan de onderzijde van de zitplaat bevestigd.

7 Geleverde onderdelen (afb. 1)

- · Zitplaat met inklapbare poten
- Armsteun (indien van toepassing) (2x)
- Rugleuning (indien van toepassing)
- Veiligheidsclips (4x)
- Gebruikershandleiding

De omvang van de levering is afhankelijk van de versie die u hebt besteld. De verschillende versies worden weergegeven in afbeelding 1.

De producten, modellen en accessoires zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

8 Productbeschrijving

De Aquatec Sorrento is een douchekruk/-stoel met vier in hoogte verstelbare antislipvoeten, inklapbare poten en een beklede kunststof zitting. Het product is verkrijgbaar met of zonder twee beklede afneembare armsteunen, met of zonder een stoffen rugleuning en met of zonder de hygiëne-uitsparing in de zitting, afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

9 Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld als hulpmiddel bij het douchen.

Het product is bedoeld voor jongeren en volwassenen met beperkte bewegingsmogelijkheden (bijv. van de benen en/of heupen). Indien het hulpmiddel zonder begeleiding wordt gebruikt, moet de gebruiker zijn/haar evenwicht kunnen bewaren.

Indicatie

Beperkte bewegingsmogelijkheden van bijvoorbeeld benen en/of heupen, of evenwichtsproblemen bij het opstaan of lopen als gevolg van een tijdelijke of permanente handicap.

Er zijn geen contra-indicaties bekend bij gebruik van het product zoals bedoeld.

Het maximale gebruikersgewicht is 135 kg.

10 Montage (afb. 3 t/m 10)



LET OP!

Beknellingsgevaar

- Wees voorzichtig tijdens het monteren.
- 1. Vouw de voetsteunen A aan beide kanten uit, zie afb 3.
- 2. Zet de poten aan alle vier de kanten vast met veiligheidsclips (B), zie afb. 4.



LET OP!

Gevaar voor lichamelijk letsel

 Zorg ervoor dat alle veiligheidsclips op de juiste wijze worden bevestigd.

De zithoogte aanpassen

 $\mathring{\underline{\sl}}$ De hoogte van de zitting kan in zes stappen van 25 mm worden aangepast tussen 460 en 610 mm.

- 2. Pas de hoogte ® van de poten aan, zie afb. 8.



WAARSCHUWING!

Risico op vallen

 Controleer of alle poten op dezelfde hoogte zijn afgesteld, zie afb. 10.

De armsteunen plaatsen (optioneel)

1. Plaats de armsteunen (A) aan beide kanten in de zitplaat (B), zie afb. 5.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

 Zorg ervoor dat beide sloten © in de armsteunen hoorbaar aan de onderkant van de zitplaat vastklikken, zie afb. 5.



LET OP!

Beknellingsgevaar

 Steek uw vingers niet in open gaten bij de armsteun en onder de zitting.

De rugleuning plaatsen (optioneel)

 Druk het rugleuningframe (A) in de openingen aan beide kanten aan de achterkant van de zitplaat (B), zie afb. 6.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- Zorg ervoor dat beide sloten © van het rugleuningframe hoorbaar aan de onderkant van de zitplaat vastklikken, zie afb. 6.
- 2. Trek de rugbekleding (A) over beide kanten van het rugleuningframe, zie afb. 7.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- 3. Sluit de rugleuningbanden door de grendels © in de gespen ® te klikken, zie afb. 7.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- Zorg ervoor dat alle gespen goed zijn gesloten.
- 4. Span de rugleuningbanden aan, zie afb. 9.
- Span de banden aan of maak deze losser om de stevigheid van de rugbekleding aan te passen.

De stoel wordt in de omgekeerde volgorde gedemonteerd.

11 Onderhoud

11.1 Algemene informatie over onderhoud

Als de instructies voor schoonmaak en desinfectie in acht worden genomen, heeft dit product geen onderhoud nodig.

11.2 Reiniging en desinfectie

Algemene veiligheidsinformatie



LET OP! Besmettingsgevaar

 Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.

BELANGRIJK!

Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.

- Alle gebruikte reinigings- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
- Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen.
 We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
- Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
- Zorg altijd dat het product volledig droog is voordat u het weer in gebruik neemt.
- Volg voor reiniging en desinfectie in klinische omgevingen of omgevingen voor langdurige zorg de intern ingestelde procedures.

Reinigingsintervallen

BELANGRIJK!

Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting.

Reinig en desinfecteer dit product

- regelmatig als het wordt gebruikt;
- voor en na onderhoudswerkzaamheden;
- als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
- voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

Reinigingsinstructies

- Maak het product schoon met water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- 2. Droog af met een doek.

Reiniging in een klinische omgeving

- Naast de hierboven beschreven manier van reinigen raden wij u aan het product te reinigen voordat dit door een andere patiënt wordt gebruikt, na beëindiging van de gebruiksperiode of op regelmatige basis (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) bij
 - 90 °C gedurende 1 minuut
 - 85 °C gedurende 3 minuten
 - 80 °C gedurende 10 minuten



LET OP!

Risico op verbranding van de huid

- Laat het product afkoelen na reiniging.

De rugbekleding reinigen

- 1. Verwijder de rugbekleding.
- 2. Was de bekleding met een mild wasmiddel in de wasmachine op maximaal 60 °C.

BELANGRIJK!

Gevaar voor beschadiging

- Wassen op hogere temperaturen kan leiden tot schade
- Niet in de wasdroger drogen.

BELANGRIJK!

Door overmatig reinigen kan het textiel beschadigd raken.

Instructies voor desinfecteren

Methode: volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het gebruikte desinfectiemiddel op en neem alle toegankelijke oppervlakken af.

Desinfectiemiddel: een standaard desinfectiemiddel voor huishoudelijk gebruik.

Drogen: laat het product aan de lucht drogen.

12 Afvoeren

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

13 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:

- Inspectie
- Schoonmaken en desinfecteren

Zie 11 Onderhoud, pagina 25 voor gedetailleerde informatie.

Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding samen met het product wordt overhandigd.

Hergebruik het product niet als er schade of afwijkingen zijn geconstateerd.

14 Technische gegevens (afb. 11, 12, 13, 14)

Afmetingen (afb. 11, 12, 13)				
Model	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728	
A	400 mm	400 mm	400 mm	
B	400 mm	400 mm	400 mm	
©	460 - 610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm	
D	570 - 600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm	
(E)	490 - 520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm	
F	850 - 990 mm	655 - 805 mm	460 - 610 mm	
G	440 mm	440 mm	_	
Θ	280 mm	280 mm	_	
①	195 mm	195 mm	_	

1	470 mm	_	_
K	380 mm	_	_
(L)	280 mm	_	_
(3)	140 mm (indien van toepassing)	140 mm (indien van toepassing)	140 mm (indien van toepassing)
(S)	170 mm (indien van toepassing)	170 mm (indien van toepassing)	170 mm (indien van toepassing)
Gewicht	5,5 kg	4 kg	3,5 kg

Max.	135 kg
gebruikersgewicht	

Materialen (afb. 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nylon/met PVC-coating

Alle onderdelen van het product zijn roestbestendig en bevatten geen natuurrubberlatex.

15 Omgevingsparameters

Bedrijfsomstandigheden				
Omgevingstemperatuur	10 - 40 °C			
Relatieve luchtvochtigheid	15% - 93%, zonder condensvorming			
Voorschriften voor opslag en transport				
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C			
Relatieve luchtvochtigheid	30% - 75%, zonder condensvorming			

....

1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om håndtering af produktet. Af sikkerhedsmæssige årsager, bør brugsanvisningen læses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne følges.

Invacare forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Før denne manual læses, skal det sikres, at det er den nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format på Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstørrelsen i det trykte dokument er svær at læse, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden. PDF-versionen kan derefter skaleres på skærmen til en skriftstørrelse, der passer dig bedre.

I tilfælde af en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal du informere producenten og den relevante myndighed i dit land.

2 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som produktet er købt hos.

3 Overensstemmelse

Kvalitet er afgørende for virksomhedens virke, og vi arbejder ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr i klasse I. Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af CE-overensstemmelseserklæringen.

Vi arbejder løbende på at sikre, at virksomhedens påvirkning af miljøet, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der overholder REACH-direktivet.

3.1 Produktspecifikke standarder

Produktet er blevet testet og overholder DS/EN 12182 (Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse) og beslægtede standarder. Kontakt din lokale Invacare-repræsentant for yderligere information om lokale standarder og bestemmelser. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

4 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er tre år, når det anvendes dagligt og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og den korrekte brug, der fremgår af denne brugsanvisning. Den effektive servicelevetid kan variere afhængigt af hyppighed og intensitet af brugen.

5 Ansvarsbegrænsning

Invacare påtager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Forkert anvendelse
- Almindeligt slid
- Forkert samling eller indstilling foretaget af køber eller en tredjepart
- Tekniske ændringer
- Uautoriserede ændringer og/eller brug af uegnede reservedele

6 Sikkerhed

6.1 Sikkerhedsoplysninger



da

ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse eller materielskade Forkert brug af dette produkt kan medføre personskade eller materiel skade.

- Hvis du ikke kan forstå advarslerne, forsigtighedshenvisningerne eller anvisningerne, bedes du kontakte en sundhedsprofessionel medarbejder eller leverandør, inden du forsøger at tage produktet i brug.
- Undlad at bruge dette produkt eller nogen former for ekstraudstyr uden først at have læst og forstået denne vejledning og andet instruktionsmateriale som f.eks. brugsanvisningen, servicemanualer eller instruktionsblade, der leveres sammen med dette produkt eller ekstraudstyret.



ADVARSEL!

Faldrisiko

- Produktet må ikke anvendes, hvis det er defekt.
- Foretag ikke uautoriserede ændringer af produktet.
- Flyt ikke produktet, mens det er belastet eller i brug.
- Træd ikke op på produktet.
- Undgå at bruge eller opbevare produktet udendørs.
- Vip ikke produktet.
- Alle fire ben skal indstilles i samme højde. (Fig. 10)
- Alle fire ben skal være i kontakt med gulvet i brusekabinen eller badekarsbunden hele tiden og på en jævn overflade.



ADVARSEL!

- Rens produktet grundigt, inden det tages i brug første gang.
- Efterse produktet for skader, og kontrollér, at det er forsvarligt monteret, hver gang inden det tages i brug.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

Uoriginalt eller forkerte dele kan påvirke produktets funktion og sikkerhed.

- Brug kun originale dele til det produkt, der anvendes.
- På grund af regionale forskelle henvises der til dit lokale Invacare-katalog eller din lokale Invacare-hjemmeside angående tilgængeligt ekstraudstyr, eller du kan kontakte din Invacare-distributør. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

6.2 Mærkater og symboler på produktet (fig. 2)

A	Producent	F	Medicinsk udstyr
B	Overholdelse af EU-krav	G	Partinummer
©	Læs brugsanvisning	Θ	Referencenummer
(D)	Maks. brugervægt	①	Produktbetegnelse
E	Produktionsdato		

Produktmærkaten er fastgjort på undersiden af sædepladen.

7 Medfølgende dele (figur 1)

- Sædeplade med sammenklappelige ben
- Armlæn (hvis relevant) (2x)
- Ryglæn (hvis relevant)
- Sikringsclips (4x)
- Brugsanvisning

Omfanget af levering afhænger af den bestilte version. De mulige versioner er vist i figur 1.

| Ikke alle produkter, modeller eller tilbehør er nødvendigvis tilgængelige i alle lande.

8 Produktbeskrivelse

Aquatec Sorrento er et brusetaburet/-stol, der består af fire skridsikre og sammenklappelige ben, der kan indstilles i højden, og et polstret plastiksæde. Produktet fås med eller uden to polstrede, aftagelige armlæn og med eller uden et

tekstilryglæn og med eller uden hygiejneudskæringen på sædet, afhængigt af brugerens behov.

9 Tiltænkt brug

Dette produkt er beregnet til at blive anvendt som hjælpemiddel i brusebadet.

Brugerne er voksne og unge med begrænset bevægelighed (f.eks. ben og/eller hofter). Brugerne skal kunne holde balancen selv, hvis den bruges uden en hjælper.

Indikation

Begrænset bevægelighed (f.eks. ben og/eller hofter) eller utilstrækkelig balance til at stå op eller gå på grund af midlertidige eller permanente handicap

Der findes ingen kendte kontraindikationer, når produktet anvendes efter hensigten.

Den maksimale brugervægt er 135 kg.

10 Samling (figur 3-10)



FORSIGTIG!

Risiko for fastklemning

- Udvis forsigtighed ved montering.

- 1. Fold benene (A) ud i begge sider se figur 3.
- 2. Fastgør benene med sikringsclips ® på alle fire sider se figur 4.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

- Sørg for, at alle sikringsclips er samlet korrekt.

Indstilling af sædehøjden

- Sædets højde kan justeres mellem 460 og 610 mm i seks intervaller af 25 mm.
- 1. Fjern sikringsclipsene A fra alle fire ben se figur 8.
- 2. Juster højden ® på benene se figur 8.
- 3. Isæt igen sikringsclipsene A på alle fire ben; se figur 8.



ADVARSEL!

Faldrisiko

 Sørg for, at alle ben er indstillet til den samme højde – se figur 10.

Montering af armlænene (valgfrit)

 Læg armlænene A på sædepladen B på begge sider – figur 5.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Sørg for, at begge låse © i hvert armlæn hørbart kommer i indgreb på undersiden af sædepladen
 se figur 5.
- FC

FORSIGTIG!

Risiko for fastklemning

 Undgå at sætte fingrene ind i åbne huller ved armlænet og under sædet.

Montering af ryglænet (valgfrit)

 Skub ryglænsrammen (A) ind i de bageste åbninger på sædepladen (B) på begge sider – se figur 6.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Sørg for, at begge låse © på ryglænsrammen hørbart kommer i indgreb på undersiden af sædepladen – se figur 6.
- 2. Skub ryglænspolstringen (A) ud over begge sider af ryglænsrammen se figur 7.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Sørg for, at enderne af ryglænsrammen sidder rigtigt i udsparingerne D til højre og til venstre på ryglænspolstringen – se figur 7.
- Luk ryglænsbåndene ved at skubbe låseelementerne © ind i spænderne ® se figur 7.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Kontrollér, at alle spænder er lukket korrekt.
- 4. Spænd ryglænsbåndene se figur 9.
 - Stram eller løsn båndene for at indstille hårdheden af ryglænspolstringen.

Stolen skilles ad i modsat rækkefølge af samlingen.

11 Vedligeholdelse

11.1 Oplysninger om generel vedligeholdelse

Dette produkt er vedligeholdelsesfrit, hvis rengørings- og desinfektionsanvisningerne følges.

11.2 Rengøring og desinfektion

Generelle sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG!

Risiko for smitte

 Tag forholdsregler, og brug passende beskyttelsesudstyr.

I

VIGTIGT!

Forkerte væsker eller metoder kan beskadige produktet.

- De anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal være effektive og kunne anvendes sammen, og de må ikke angribe de materialer, der rengøres.
- Brug aldrig korroderende væsker (basiske rengøringsmidler, syre osv.) eller slibende rengøringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt husholdningsrengøringsmiddel som f.eks. opvaskesæbe, hvis der ikke angives andet i rengøringsanvisningerne.
- Brug aldrig opløsningsmidler (cellulosefortynder, acetone osv.), der ændrer plastens struktur eller opløser de påsatte mærkater.
- Sørg altid for, at produktet er helt tørt, før det tages i brug igen.
- For rengøring og desinfektion i kliniske omgivelser eller omgivelser til langvarig pleje skal de pågældende interne procedurer følges.

Rengøringsintervaller



VIGTIGT!

Regelmæssig rengøring og desinficering fremmer problemfri drift, forlænger servicelevetiden og forebygger kontaminering.

Rengør og desinficer produktet

- regelmæssigt, mens det er i brug,
- før og efter enhver serviceprocedure,
- når det har været i kontakt med kropsvæsker,
- før det bruges til en ny bruger.

Rengøringsinstruktioner

- Brug vand og et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel til rengøring af produktet.
- 2. Tør efter med en klud.

Rengøring i et klinisk miljø

- Udover rengøring som beskrevet ovenfor anbefaler vi, at produktet rengøres, før det bruges af en anden patient, når produktet ikke længere anvendes eller med jævne mellemrum (alt efter hvad der optræder først) ved
 - 90 °C i 1 minut
 - 85 °C i 3 minutter
 - 80 °C i 10 minutter



FORSIGTIG!

Fare for hudforbrænding

- Lad produktet afkøle efter rengøring.

Rengøring af ryglænspolstring

- .. Tag ryglænspolstringen af.
- 2. Vask betrækket i vaskemaskine ved maks. 60 °C med et mildt rengøringsmiddel.

VIGTIGT!

Risiko for beskadigelse

- Vask ved højere temperaturer kan medføre beskadigelse.
- Må ikke tørretumbles.



VIGTIGT!

For meget rengøring kan beskadige tekstilerne.

Desinficeringsinstruktioner

Metode: Følg bemærkningerne angående påføring af det anvendte desinfektionsmiddel, og påfør det på alle tilgængelige overflader.

Desinficeringsmiddel: Almindeligt desinfektionsmiddel.

Tørring: Lad produktet lufttørre.

12 Bortskaffelse

Vær miljøbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til den lokale genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, så de forskellige materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for affaldshåndtering i det enkelte land. Kontakt den lokale renovationsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

13 Eftersyn

Dette produkt er egnet til brug flere gange. Følgende handlinger skal udføres i forbindelse med istandsættelse af produktet til en ny bruger:

- Eftersyn
- · Rengøring og desinfektion

Se 11 Vedligeholdelse, side 29 for mere detaljerede oplysninger.

Sørg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader eller fejl.

14 Tekniske data (fig. 11, 12, 13, 14)

Mål (fig	Mål (fig. 11, 12, 13)					
Model	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728			
A	400 mm	400 mm	400 mm			
B	400 mm	400 mm	400 mm			
©	460-610 mm	460-610 mm	460-610 mm			
D	570-600 mm	570-600 mm	570-600 mm			
E	490-520 mm	490-520 mm	490-520 mm			
F	850-990 mm	655-805 mm	460-610 mm			
G	440 mm	440 mm	_			
\oplus	280 mm	280 mm	_			
①	195 mm	195 mm	_			
①	470 mm	_	_			
K	380 mm	_	_			
(L)	280 mm	_	_			
M	140 mm (hvis relevant)	140 mm (hvis relevant)	140 mm (hvis relevant)			
(2)	170 mm (hvis relevant)	170 mm (hvis relevant)	170 mm (hvis relevant)			
Vægt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg			

Maks. brugervægt 135 kg

Materialer (figur 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nylon-/PVC-belægning

Alle produktkomponenter er korrosionsbestandige og indeholder ikke naturgummilatex.

15 Miljøparametre

Driftsforhold				
Omgivende temperatur	10-40 °C			
Relativ luftfugtighed	15 %-93 %, ikke-kondenserende			
Forhold i forbindelse med opbevaring og transport				
Omgivende temperatur	0-40 °C			
Relativ luftfugtighed	30 %-75 %, ikke-kondenserende			

no

1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye,

og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

2 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

3 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1. Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

3.1 Produktspesifikke standarder

Produktet har blitt testet og er i samsvar med EN 12182 (Tekniske hjelpemidler for personer med funksjonshemming) og tilhørende standarder. Kontakt din lokale Invacare-representant for ytterligere informasjon om lokale standarder og regelverk. Se adresser nederst i dette dokumentet.

4 Levetid

Produktets forventede levetid er tre år ved daglig bruk, gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er lagt frem i denne håndboken. Den faktiske levetiden varierer etter brukens hyppighet og intensitet.

5 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

6 Sikkerhet

6.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Fare for alvorlig personskade eller skade på utstyr Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade på utstyr.

- Hvis du har problemer med å forstå advarslene, forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell eller en leverandør eller teknisk personell før du forsøker å bruke dette utstyret.
- Du må ikke bruke dette produktet eller annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke først har lest og forstått disse instruksjonene og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsdokumenter som følger med dette produktet eller ekstrautstyr.



ADVARSEL!

Risiko for å falle

- Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Utfør ikke noen endringer på produktet uten tillatelse.
- Ikke flytt eller endre stilling på produktet under bruk.
- Stå ikke på dette produktet.
- Produktet skal ikke brukes eller oppbevares utendørs.
- Må ikke skråstilles.
- Alle de fire bena må justeres til samme høyde. (fig. 10)
- Alle de fire benspissene må være i kontakt med dusjgulvet/badekarbunnen hele tiden og være på en jevn overflate.



ADVARSEL!

- Rengjør produktet grundig før det brukes første gang.
- Før hver bruk, sjekk produktet for skade og forsikre deg om at det er trygt.



FORSIKTIG! Skaderisiko

Uoriginale eller uegnede deler kan gå ut over produktets virkemåte og sikkerhet.

- Bruk bare originale deler til det aktuelle produktet.
- På grunn av regionale forskjeller må du se din lokale Invacare-katalog eller ditt lokale Invacare-nettsted, alternativt kan du kontakte Invacare-leverandøren. Se adresser nederst i dette dokumentet.

6.2 Merking og symboler på produktet (Fig. 2)

A	Produsent	F	Medisinsk utstyr
B	EU	G	Lotnummer
©	Les bruksanvisningen	θ	Referansenummer
D	Maksimal brukervekt	1)	Produktnavn
(E)	Produksjonsdato		

ldentifikasjonsmerket er plassert på undersiden av seteplaten.

7 Leveringsinnhold (Fig. 1)

- Seteplate med sammenleggbare ben
- Armlene (hvis aktuelt) (2x)
- Rygglene (hvis aktuelt)
- Låseklips (4x)
- Bruksanvisning

Produktleveransen avhenger av hvilken versjon som bestilles. De ulike versjonene vises i figur 1.

Det kan være at alle produkter, modeller eller alt tilbehør ikke er tilgjengelig i alle land.

8 Produktbeskrivelse

Aquatec Sorrento er en dusjkrakk/-stol som består av fire sklisikre høydejusterbare og sammenleggbare ben samt et polstret plastsete. Produktet er tilgjengelig med eller uten to polstrede avtakbare armlener og med eller uten et rygglene i tekstil med eller uten utskjæring i setet for å sikre hygiene, avhengig av brukernes behov.

9 Tiltenkt bruk

Dette produktet er ment å brukes som et dusjhjelpemiddel.

Brukere er voksne og ungdom med ingen eller begrenset mobilitet (f.eks.: ben og/eller hofter). Hvis den brukes uten en assistent, må brukeren være i stand til å holde balansen selv.

Indikasjon

Ingen eller begrenset mobilitet (f.eks.: ben og/eller hofter) eller balanseproblemer i forbindelse med å reise seg opp eller gå på grunn midlertidige eller permanente funksjonsbegrensinger

Det er ingen kontraindikasjoner når produktet brukes som tiltenkt.

Maks. brukervekt er 135 kg.

10 Montering (fig. 3-10)



FORSIKTIG!

Klemfare

- Utvis forsiktighet under montering.
- 1. Brett ut stolbenene (A) på begge sider, se fig. 3.
- 2. Lås stolbenene med låseklipsene ® på alle fire sider, se fig. 4.



FORSIKTIG!

Skaderisiko

 Forsikre deg om at alle låseklipsene er riktig montert.

Justering av setehøyden

- Høyden på setet kan bli justert mellom 460 og 610 mm i seks steg på 25 mm.
- 1. Fjern låseklipsene A fra alle fire stolben, se fig. 8.
- 2. Juster høyden ® på bena, se fig. 8.
- 3. Sett inn igjen låseklipsene (A) på alle fire ben, se fig. 8.



ADVARSEL!

Risiko for å falle

 Forsikre deg om at alle bena er justert til samme høyde, se fig. 10.

Montere armlenene (ekstrautstyr)



ADVARSEL!

Skaderisiko

 Forsikre deg om at begge hakkene © i hvert armlene lager en lyd når de blir festet i undersiden av seteplaten, se fig. 5.



FORSIKTIG!

Klemfare

 Ikke putt fingrene dine i de åpne hullene i armlenene og under setet.

Montere rygglenet (ekstrautstyr)

1. Dytt ryggrammen (A) inn i bakåpningen på seteplaten (B) på begge sider, se fig. 6.



ADVARSEL!

Skaderisiko

- Forsikre deg om at begge hakkene © i ryggrammen lager lyd når den blir festet i undersiden av seteplaten, se fig. 6.
- Dra ryggtrekket

 over begge sider av ryggrammen, se fig. 7.



ADVARSEL!

Skaderisiko

- 3. Lukk rygglene-båndene ved å dytte låsene © inn i spennene ®, se fig. 7.



ADVARSEL!

Skaderisiko

- Forsikre deg om at alle spennene er trygt lukket.
- 4. Stram rygglene-båndene, se fig. 9.
 - Stram eller løsne båndene for å tilpasse stramheten på ryggtrekket.

Stolen skal bli tatt fra hverandre i motsatt rekkefølge av montering.

11 Vedlikehold

11.1 Generell vedlikeholdsinformasjon

Produktet er vedlikeholdsfritt, forutsatt at instruksjonene for rengjøring og sikkerhet overholdes.

11.2 Rengjøring og desinfisering

Generell sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG!

Fare for kontaminering

 Ta dine egne forholdsregler og bruk passende verneutstyr.

VIKTIG!

Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge produktet.

- Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må være av god kvalitet og kompatible med hverandre. I tillegg må de beskytte materialene de skal rengjøre.
- Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.)
 eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et
 vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som
 for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet
 er spesifisert i rengjøringsanvisningene.
- Bruk aldri et løsemiddel (cellulosetynnere, aceton etc.) som forandrer plastens struktur eller får etikettene til å løsne.
- Pass alltid på at produktet er helt tørket før det tas i bruk igjen.
- For rengjøring og desinfeksjon i kliniske omgivelser eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle retningslinjer for hygiene.

Rengjøringshyppighet

VIKTIG!

Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer kontaminering.

Rengjør og desinfiser produktet

- jevnlig mens det er i bruk,
- før og etter enhver serviceprosedyre,
- når det har vært i kontakt med enhver type kroppsvæske,
- før det brukes på en ny bruker.

Rengjøringsanvisninger

- Bruk vann og et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel til å rengjøre produktet.
- 2. Tørk delene med en klut.

Rengjøring i kliniske omgivelser

- I tillegg til rengjøringen som er angitt ovenfor, anbefaler vi at produktet rengjøres etter at hver pasient er utskrevet, når en bruksperiode er over eller regelmessig (avhengig av hva som kommer først) ved
 - 90 °C i 1 minutt
 - 85 °C i 3 minutter
 - 80 °C i 10 minutter



FORSIKTIG!

Fare for brannskade på huden

La produktet avkjøles etter rengjøring.

Rengjøre ryggtrekket

- Ta av ryggtrekket.
- Vask trekket i vaskemaskin ved maks. 60 °C med et mildt vaskemiddel.



VIKTIG!

Fare for skade

- Vask ved høyere temperaturer kan føre til skade.
- Tørk ikke i tørketrommel.



VIKTIG!

Overdreven rengjøring kan skade tekstilene.

Instrukser for desinfisering

Metode: Følg bruksmerknadene for det aktuelle desinfeksjonsmiddelet, og desinfiser med klut på alle tilgjengelige overflater. Desinfiseringsmiddel: Vanlig desinfiseringsmiddel til husholdningsbruk.

Tørking: La produktet lufttørke.

12 Avfallshåndtering

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale renovasjonsselskapet.

13 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny bruker:

- Kontroll
- Rengjøring og desinfisering

For detaljert informasjon, se 11 Vedlikehold, side 32.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke produktet på nytt.

14 Tekniske data (fig. 11, 12, 13, 14)

Mål (fig	Mål (fig. 11, 12, 13)				
Modell	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728		
(A)	400 mm	400 mm	400 mm		
B	400 mm	400 mm	400 mm		
©	460–610 mm	460–610 mm	460–610 mm		
D	570–600 mm	570–600 mm	570–600 mm		
E	490–520 mm	490–520 mm	490–520 mm		
F	850–990 mm	655–805 mm	460–610 mm		
©	440 mm	440 mm	_		
Θ	280 mm	280 mm	_		
①	195 mm	195 mm	_		
①	470 mm	_	_		
K	380 mm	_	_		
L	280 mm	_	_		
M	140 mm (hvis aktuelt)	140 mm (hvis aktuelt)	140 mm (hvis aktuelt)		
(2)	170 mm (hvis aktuelt)	170 mm (hvis aktuelt)	170 mm (hvis aktuelt)		
Vekt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg		

Maks. brukervekt 135 kg

Materialer (fig. 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nylon/PVC-belagt

Alle produktkomponentene er rustmotstandige, og inneholder ikke lateks av naturgummi.

15 Miljøparametere

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	10-40 °C	
Relativ luftfuktighet	15 % – 93 %, ikke-kondenserende	
Oppbevarings og transport		
Omgivelsestemperatur	0–40 °C	
Relativ luftfuktighet	30 % – 75 %, ikke-kondenserende	

sv

1 Inledning

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hantering av produkten. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert sätt.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av den här bruksanvisningen innan du läser den. Du hittar den senaste versionen som PDF-fil på Invacares webbplats.

Om du tycker att teckensnittsstorleken i den tryckta versionen av bruksanvisningen är svår att läsa kan du ladda ned PDF-versionen från webbplatsen. Du kan sedan förstora PDF-filen på skärmen till en teckensnittsstorlek som passar dig bättre.

Om en allvarlig incident inträffar med produkten bör du informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

2 Information om garanti

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

3 Överensstämmelse

Kvalitet är absolut grundläggande för företagets verksamhet, och vi arbetar i enlighet med standarden ISO 13485.

Den här produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745 klass 1. Lanseringsdatum för produkten anges i CE:s försäkran om överensstämmelse.

Vi arbetar ständigt på att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt.

Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

3.1 Produktspecifika standarder

Produkten har testats och överensstämmer med EN 12182 (hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning) och relaterade standarder. Kontakta din lokala representant för Invacare om du vill ha mer information om lokala standarder och bestämmelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

4 Produktlivslängd

Denna produkts förväntade livslängd är tre år när den används dagligen i enlighet med de säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och korrekt användning som anges i denna manual. Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur mycket och intensivt produkten används.

5 Ansvarsbegränsning

Invacare ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av

- att bruksanvisningen inte följs
- felaktig användning
- normalt slitage
- felaktig montering eller inställning som utförs av köparen eller tredje part
- tekniska ändringar
- obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga reservdelar.

6 Säkerhet

6.1 Säkerhetsinformation



VARNING!

Risk för allvarliga personskador eller materiella skador

Felaktig användning av den här produkten kan orsaka person- eller sakskador.

- Om du inte kan förstå varningarna eller instruktionerna ska du kontakta hälso- eller sjukvårdspersonal eller leverantören innan du använder utrustningen.
- Använd inte produkten eller någon tillvalsutrustning innan du har läst och förstått de här instruktionerna och eventuellt ytterligare instruktionsmaterial som bruksanvisning, servicemanualer eller instruktionsblad som medföljer produkten eller tillvalsutrustningen.



VARNING!

Fallrisk

- Använd inte produkten om den är defekt.
- Utför inga obehöriga ändringar eller modifieringar på produkten.
- Flytta inte produkten och förskjut inte dess tyngdpunkt när den belastas eller används.
- Stå inte på produkten.
- Produkten ska inte användas eller förvaras utomhus.
- Luta den inte.
- Alla fyra ben måste justeras till samma höjd. (Bild 10)
- Alla fyra ben måste vara i kontakt med duschgolv/badkarsbotten hela tiden och stå på en jämn yta.



VARNING!

- Innan produkten används första gången ska den rengöras noggrant.
- Före varje användningstillfälle ska du kontrollera produkten beträffande eventuella skador och säkerställa att den är korrekt monterad.



FÖRSIKTIGT! Risk för personskador

Delar som ej är original eller som är felaktiga kan påverka produktens funktion och säkerhet.

- Använd endast originaldelar för den produkt som används.
- På grund av regionala skillnader, se din lokala Invacare-katalog eller webbplats för tillgängliga alternativ eller kontakta din Invacare-distributör. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

6.2 Etiketter och symboler på produkten (bild 2)

A	Tillverkare	F	Medicinteknisk produkt
B	Europeisk överensstämmelse	G	Lotnummer
©	Läs bruksanvisningen	θ	Referensnummer
D	Brukarens maxvikt	①	Produktbeteckning
E	Tillverkningsdatum		

serienummeretiketten sitter på sittplattans undersida.

7 Ingår i leveransen (bild 1)

- · Sittplatta med fällbara ben
- Armstöd (om tillämpligt) (2x)
- Ryggstöd (om tillämpligt)
- Säkerhetsklämmor (4x)
- Bruksanvisning

Vad som ingår i leveransen beror på vilken version som beställs. De möjliga versionerna visas i bild 1.

Alla produkter, modeller eller tillbehör är inte nödvändigtvis tillgängliga i varje land.

8 Produktbeskrivning

Aquatec Sorrento är en duschpall/stol som består av fyra halksäkra, höjdjusterbara och fällbara ben och en vadderad plastsits. Produkten är tillgänglig med eller utan två vadderade, löstagbara armstöd med eller utan ett tygryggstöd och med eller utan hygienutskärningen på sitsen, beroende på brukarens behov.

9 Avsedd användning

Denna produkt är avsedd att användas som ett duschhjälpmedel.

Brukare är vuxna och ungdomar med nedsatt eller begränsad rörlighet (t. ex.: ben och/eller höfter). Vid användning utan en assistent måste brukare kunna hålla balansen själv.

Indikation

Begränsad eller nedsatt rörlighet (t. ex.: ben och/eller höfter) eller har problem med balansen vid gång eller resning till stående position på grund av övergående eller permanenta funktionsnedsättningar

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av den här produkten.

Brukarens maxvikt är 135 kg.

10 Montering (bild 3 - 10)



FÖRSIKTIGT!

Risk för att fastna

- Var försiktig vid montering.
- 1. Vik ut benen A på båda sidor, se bild 3.
- Säkra benen med säkerhetsklämmor ® på alla fyra sidor, se bild 4.



FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador

 Se till att alla säkerhetsklämmor är ordentligt monterade.

Justera sitthöjden

- $\frac{\circ}{1}$ Sitthöjden kan justeras mellan 460 och 610 mm i sex steg om 25 mm.
- 2. Justera höjden ® på benen, se bild 8.



VARNING!

Fallrisk

 Kontrollera att alla benen är inställda på samma höjd, se bild 10.

Passa in armstöden (tillval)



VARNING!

Risk för personskador

 Se till att båda hakarna © i varje armstöd klickar på plats på undersidan av sittplattan, se bild 5.



FÖRSIKTIGT!

Risk för att fastna

 Stick inte in fingrarna i öppna hål vid armstödet eller under sitsen.

Passa in ryggstödet (tillval)

1. Skjut in ryggstödsramen (A) i öppningarna baktill på sittplattan (B) på båda sidorna, se bild 6.



VARNING!

Risk för personskador

- Se till att båda hakarna © på ryggstödsramen klickar på plats på undersidan av sittplattan, se bild 6.
- 2. Dra ned ryggstödsklädseln (A) över båda sidorna på ryggstödsramen, se bild 7.



VARNING!

Risk för personskador

- Se till att ändarna av ryggstödsramen sitter ordentligt i försänkningarna © på höger och vänster sida av ryggstödsklädseln, se bild 7.
- 3. Stäng ryggstödsbanden genom att trycka in låsen © i spännena ®, se bild 7.



1528666-D

VARNING!

Risk för personskador

- Se till att alla spännen är ordentligt stängda.
- 4. Dra åt ryggstödsbanden, se bild 9.

Dra åt eller släpp på banden för att justera hur hårt ryggstödsklädseln sitter åt.

Stolen tas isär på samma sätt som den monteras, fast i omvänd ordning.

11 Underhåll

11.1 Allmän information för underhåll

Produkten är underhållsfri förutsatt att rengörings- och desinficeringsinstruktionerna följs.

11.2 Rengöring och desinfektion

Allmän säkerhetsinformation



FÖRSIKTIGT!

Risk för kontaminering

 Vidta försiktighetsåtgärder för dig själv och använd lämplig skyddsutrustning.



VIKTIGT!

Felaktiga vätskor och metoder kan skada produkten.

- Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
- Använd aldrig korroderande vätskor (alkaliska ämnen, syror etc.) eller slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i rengöringsanvisningarna.
- Använd aldrig ett lösningsmedel (cellulosathinner, aceton etc.) som ändrar strukturen i plasten eller löser upp fästa etiketter.
- Se alltid till att produkten är helt torr innan den tas i bruk igen.
- j

För rengöring och desinfektion i kliniska eller långvårdsmiljöer gäller riktlinjer för institutionell hygien.

Rengöringsintervall



VIKTIGT!

Regelbunden rengöring och desinfektion förbättrar smidig drift, förlänger livslängden och förhindrar kontaminering.

Rengör och desinficera produkten

- regelbundet då den är i bruk,
- före och efter underhållsprocedurer,
- när den har kommit kontakt med kroppsvätskor,
- innan den används med en ny brukare.

Instruktioner för rengöring

- 1. Rengör produkten med vatten och ett milt rengöringsmedel som inte repar.
- 2. Torka torrt med en trasa.

Rengöring i en klinisk miljö

- Förutom den rengöring som beskrivs ovan rekommenderar vi att produkten rengörs innan den används av en annan patient, efter avslutad användningsperiod eller med regelbundna intervall (beroende på vad som kommer först) vid
 - 90 °C i 1 minut
 - 85 °C i 3 minuter
 - 80 °C i 10 minuter



FÖRSIKTIGT! Risk för att bränna sig

- Låt produkten svalna av efter rengöring.

Rengöra ryggstödsklädseln

- 1. Ta loss ryggstödsklädseln.
- Tvätta klädseln i tvättmaskin i max 60 °C med milt tvättmedel.
 - Į

VIKTIGT!

Risk för produktskador

- Vid högre tvättemperatur kan klädseln skadas.
- Får inte torktumlas.
- Ĭ

VIKTIGT!

Överdriven rengöring kan skada tyget.

Instruktioner för rengöring och desinficering

Metod: Följ rekommendationerna för valt desinfektionsmedel och desinficera genom att torka av alla åtkomliga ytor.

Desinfektionsmedel: Vanligt desinfektionsmedel för hushållsbruk.

Torkning: Låt produkten lufttorka.

12 Kassering

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialen kan separeras och återvinnas individuellt.

Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.

13 Rekonditionering

Den här produkten kan återanvändas. Gör följande när produkten ska rekonditioneras för en ny användare:

Inspektion

36

• Rengöring och desinfektion

För ingående information, se 11 Underhåll, Sida 35.

Se till att bruksanvisningen överlämnas tillsammans med produkten.

Om skador eller fel upptäcks ska produkten inte återanvändas.

14 Tekniska data (bild 11, 12, 13, 14)

Dimensioner (bild 11, 12, 13)				
Modell	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728	
A	400 mm	400 mm	400 mm	

B	400 mm	400 mm	400 mm
©	460–610 mm	460–610 mm	460–610 mm
D	570–600 mm	570–600 mm	570–600 mm
E	490–520 mm	490–520 mm	490–520 mm
F	850–990 mm	655–805 mm	460–610 mm
G	440 mm	440 mm	_
Θ	280 mm	280 mm	_
①	195 mm	195 mm	_
①	470 mm	_	_
K	380 mm	_	_
L	280 mm	_	_
M	140 mm (om tillämpligt)	140 mm (om tillämpligt)	140 mm (om tillämpligt)
(8)	170 mm (om tillämpligt)	170 mm (om tillämpligt)	170 mm (om tillämpligt)
Vikt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg

Brukarens maxvikt	135 kg
-------------------	--------

Material (bild 14)			
A	AL	©	PP
B	PP	D	Nylon/PVC-överdragen

Alla produktkomponenter är korrosionsbeständiga och innehåller inte naturgummilatex.

15 Miljöparametrar

Driftförhållanden			
Omgivande temperatur	10–40 °C		
Relativ luftfuktighet	15 %–93 % icke-kondenserande		
Förvarings- och transportförhållanden			
Omgivande temperatur	0–40 °C		
Relativ luftfuktighet	30 %–75 % icke-kondenserande		

f

1 Johdanto

Tämä käyttöopas sisältää tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, että käytössäsi on sen viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen, voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi suurentaa näytössä helpommin luettavaan kokoon.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvä onnettomuus, ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

2 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehdä vain sen myyjän kautta, jolta tuote ostettiin.

3 Yhteensopivuus

Yhtiömme toiminnalle keskeistä on laatu, ja yhtiö noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tässä tuotteessa on CE-merkki lääkintälaitteita koskevan asetuksen 2017/745 luokan I vaatimusten mukaisesti. Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että yrityksen ympäristövaikutus on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähäinen.

Käytämme vain REACH-järjestelmän mukaisia materiaaleja ia osia.

3.1 Tuotekohtaiset standardit

Tuote on testattu, ja se täyttää standardin EN 12182 (vammaisten apuvälineet) sekä siihen liittyvien standardien vaatimukset. Lisätietoa paikallisista standardeista ja säädöksistä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Invacaren edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

4 Käyttöikä

Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on kolme vuotta, kun sitä käytetään päivittäin tässä oppaassa ilmoitettujen turvallisuusohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään.

5 Rajoitettu vastuu

Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

- · käyttöoppaan noudattamatta jättäminen
- väärä käyttö
- luonnollinen kuluminen
- ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama väärä kokoonpano tai asennus
- tekniset muutokset
- luvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien käyttö.

6 Turvallisuus

6.1 Turvallisuustiedot



VAROITUS!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Tämän tuotteen vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa vamman tai vahingon.

- Jos et ymmärrä varoituksia, huomautuksia tai ohjeita, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai toimittajaan ennen laitteen käyttämistä.
- Älä käytä tätä tuotetta tai siihen saatavilla olevia lisävarusteita ennen kuin olet lukenut kokonaan nämä ohjeet ja mahdolliset lisäohjeet, kuten käyttöopas, huolto-oppaat ja ohjelehtiset, jotka on toimitettu tämän tuotteen tai lisävarusteen mukana, ja ymmärtänyt ne.



VAROITUS!

Kaatumisvaara

- Viallista tuotetta ei saa käyttää.
- Tuotteeseen ei saa tehdä mitään luvattomia muutoksia.
- Älä siirrä tai liikuta tuotetta kuormitettuna tai käytön aikana.
- Älä seiso tämän tuotteen päällä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta ulkona.
- Älä kallista.
- Kaikki neljä jalkaa on säädettävä samalle korkeudelle. (Kuva 10)
- Kaikkien neljän jalan päiden on oltava tasaisella alustalla ja jatkuvasti kosketuksissa suihkun lattiaan tai ammeen pohjaan.



VAROITUS!

- Tuote on puhdistettava perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta ja varmista, että se on koottu turvallisesti.



HUOMIO!


Loukkaantumisvaara

Muut kuin alkuperäiset osat tai väärät osat voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

- Käytä vain tuotteen alkuperäisiä osia.
- Katso alueellasi saatavilla olevat lisävarusteet paikallisesta Invacare-kuvastosta tai verkkosivulta tai ota yhteyttä Invacare-jälleenmyyjään. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

6.2 Tuotteen merkinnät ja symbolit (kuva 2)

A	Valmistaja	F	Lääkinnällinen laite
B	Euroopan vaatimustenmukaisuus	G	Eränumero
©	Lue käyttöopas	Θ	Viitenumero
D	Käyttäjän enimmäispaino	①	Tuotteen nimi
E	Valmistuspäivä		

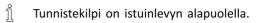

7 Toimituksen sisältö (kuva 1)

- Istuinlevy ja kokoontaitettavat jalat
- Käsinoja (jos sisältyy toimitukseen) (2 kpl)
- Selkänoja (jos sisältyy toimitukseen)
- Kiinnikkeet (4 kpl)
- Käyttöopas

Toimituksen laajuus määräytyy tilatun version mukaan: Mahdolliset versiot näkyvät kuvassa 1.

Kaikki tuotteet, mallit tai lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

8 Tuotteen kuvaus

Aquatec Sorrento on suihkujakkara/-tuoli, jossa on neljä liukumatonta, korkeudeltaan säädettävää ja kokoontaitettavaa jalkaa sekä pehmustettu muovi-istuin. Tuotteeseen on käyttäjien tarpeiden mukaan saatavana lisävarusteena kaksi pehmustettua irrotettavaa käsinojaa sekä kankainen selkänoja. Lisäksi istuinosasta on saatavana sekä yhtenäinen että hygienia-aukolla varustettu versio.

9 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu suihkussa käynnin apuvälineeksi.

Kohdekäyttäjiä ovat aikuiset ja nuoret, joilla on liikuntakyvyn rajoituksia (esim. jalat ja/tai lonkat). Jos tuotetta käytetään ilman avustajaa, käyttäjän on voitava pysyä tasapainossa.

Käyttöaihe

Liikuntakyvyn rajoitukset (esim. jaloissa ja/tai lonkissa) sekä tilapäisten tai pysyvien rajoitteiden aiheuttamat tasapaino-ongelmat seisomaan noustessa tai kävellessä.

Tämän tuotteen käyttämiselle ei ole tiedossa mitään vasta-aiheita, kun tuotetta käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.

Käyttäjän enimmäispaino on 135 kg.

10 Kokoaminen (kuvat 3-10)



HUOMIO!

Puristumisvaara

- Ole varovainen kokoamisen aikana.
- 1. Taita jalkaosat (A) ulos molemmilta puolilta, katso kuva 3.
- 2. Kiinnitä jalat kaikilla neljällä sivulla käyttämällä kiinnikkeitä ®, katso kuva 4.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Varmista, että kaikki kiinnikkeet on asennettu oikein.

Istuinkorkeuden säätäminen

- Istuimen korkeutta voi säätää välillä 460–610 mm 25 mm:n välein.
- 1. Poista kiinnikkeet (A) kaikista neljästä jalasta, katso kuva 8.
- 2. Säädä jalkojen korkeutta ®, katso kuva 8.
- 3. Kiinnitä kiinnikkeet (A) uudelleen kaikkiin neljään jalkaan, katso kuva 8.



VAROITUS!

Kaatumisvaara

 Varmista, että kaikki jalakset on säädetty samalle korkeudelle, katso kuva 10.

Käsinojien asentaminen (lisävaruste)

 Laske käsinojat (A) istuinlevylle (B) molemmilla puolilla, katso kuva 5.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

 Varmista, että kunkin käsinojan molemmat pidikkeet © kiinnittyvät kuuluvasti istuinlevyn alapuolelle, katso kuva 5.



HUOMIO!

Puristumisvaara

 Älä laita sormiasi käsinojissa ja istuimen alapuolella oleviin avoimiin reikiin.

Selkänojan asentaminen (lisävaruste)

1. Työnnä selkänojan runko & istuinlevyn taka-aukkoihin ® molemmilla puolilla, katso kuva 6.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

- Varmista, että selkänojan rungon molemmat pidikkeet © kiinnittyvät kuuluvasti istuinlevyn alapuolelle, katso kuva 6.
- 2. Vedä selkänojan suojus A alas selkänojan rungon molempien puolten yli, katso kuva 7.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara


- Varmista, että selkänojan rungon päädyt ovat asianmukaisesti aukoissa ® selkänojan suojuksen oikealla ja vasemmalla puolella, katso kuva 7.
- Sulje selkänojan nauhat työntämällä salvat © pidikkeisiin
 katso kuva 7.



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

- Varmista, että kaikki pidikkeet on suljettu kunnolla.
- 4. Kiristä selkänojan nauhoja, katso kuva 9.

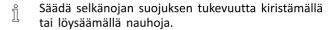

Tuoli puretaan osiin tekemällä kokoamistoimet päinvastaisessa järjestyksessä.

11 Huolto

11.1 Yleisiä huoltotietoja

Tätä tuotetta ei tarvitse huoltaa, kunhan puhdistus- ja desinfiointiohjeita noudatetaan.

11.2 Puhdistaminen ja desinfiointi

Yleisiä turvallisuustietoja



HUOMIO!

Kontaminaatioriski

 Ole varovainen tuotteen kanssa ja käytä asianmukaisia suojavarusteita.

TÄRKEÄÄ!

Väärät nesteet tai menetelmät voivat vahingoittaa tai vaurioittaa tuotetta.

- Kaikkien käytettyjen puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden täytyy olla tehokkaita ja yhteensopivia toistensa kanssa ja niiden täytyy suojata materiaaleja, joita niillä puhdistetaan.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä nesteitä (emäksiä, happoa jne.) tai hankaavia puhdistusaineita. Suosittelemme tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole muuta määritelty.
- Älä koskaan käytä liuotinta (selluloosaohenninta, asetonia jne.), joka muuttaa muovin rakennetta tai irrottaa kiinnitetyt merkinnät.
- Varmista aina, että tuote on täysin kuivattu, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.
- Noudata kliinisissä tai pitkäaikaisissa hoitoympäristöissä laitoksesi puhdistusta ja desinfiointia koskevia käytäntöjä.

Puhdistusvälit

TÄRKEÄÄ!

Säännöllinen puhdistaminen ja desinfiointi edistää sujuvaa toimintaa, pidentää käyttöikää ja estää kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote

- säännöllisesti sen ollessa käytössä
- ennen jokaista huoltotoimenpidettä ja sen jälkeen
- kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin
- ennen sen käyttämistä uudelle käyttäjälle.

Puhdistusohje

- Puhdista tuote vedellä ja miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella.
- 2. Kuivaa liinalla.

Puhdistaminen terveydenhuollon ympäristössä

- Edellä annettujen ohjeiden mukaisen puhdistuksen lisäksi on suositeltavaa puhdistaa tuote ennen toisen potilaan käyttöä, jokaisen käyttöjakson päättymisen jälkeen tai säännöllisin välein (sen mukaan, mikä tulee ensin)
 - 90 °C:n lämpötilassa 1 minuutin ajan
 - 85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan
 - 80 °C:n lämpötilassa 10 minuutin ajan



HUOMIO!

Ihon palovammavaara

- Anna tuotteen jäähtyä puhdistuksen jälkeen.

Selkänojan suojuksen puhdistaminen

- 1. Irrota selkänojan suojus.
- Pese suojus pesukoneessa enintään 60 °C:n lämpötilassa miedolla pesuaineella.

TÄRKEÄÄ! Vaurioitumisen vaara

- Korkeammassa lämpötilassa peseminen voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä kuivaa kuivausrummussa.

TÄRKEÄÄ!

Liiallinen puhdistaminen voi vaurioittaa tekstiilimateriaaleja.

Desinfiointiohjeet

Menetelmä: Noudata käytetyn desinfiointiaineen käyttöohjeita ja desinfioi kaikki esillä olevat pinnat pyyhkimällä.

Desinfiointiaine: Tavallinen kotitalouden desinfiointiaine.

Kuivaus: Anna tuotteen kuivua ilmassa.

12 Hävittäminen

Suojele ympäristöä ja vie tuote käytön jälkeen paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella ja kierrättää erikseen.

Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten hävittämisessä ja kierrättämisessä on noudatettava kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja paikalliselta jätehuoltolaitoksesta.

13 Kunnostaminen

Tämä tuote sopii käytettäväksi uudelleen. Toimi seuraavasti, kun tuotetta kunnostetaan uutta käyttäjää varten: 1528666-D

- Tarkistaminen
- Puhdistaminen ja desinfiointi

Lisätietoja on kohdassa 11 Huolto, sivu 38.

Varmista, että käyttöopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai häiriöitä löytyy, älä käytä tuotetta uudelleen.

14 Tekniset tiedot (kuvat 11,12, 13 ja 14)

Mitat (Mitat (kuvat 11,12 ja 13)			
Malli	1532633, 1532730	1532660, 1532729	1532661, 1532728	
A	400 mm	400 mm	400 mm	
B	400 mm	400 mm	400 mm	
©	460–610 mm	460 - 610 mm	460 - 610 mm	
D	570–600 mm	570 - 600 mm	570 - 600 mm	
E	490–520 mm	490 - 520 mm	490 - 520 mm	
F	850–990 mm	655–805 mm	460 - 610 mm	
G	440 mm	440 mm	_	
Θ	280 mm	280 mm	_	
①	195 mm	195 mm	_	
①	470 mm	_	_	
K	380 mm	_	_	
(L)	280 mm	_	_	
M	140 mm (tarvittaessa)	140 mm (if applicable)	140 mm (if applicable)	
(2)	170 mm (tarvittaessa)	170 mm (tarvittaessa)	170 mm (if applicable)	
Paino	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	

Käyttäjän	135 kg	
enimmäispaino		

Materiaalit (kuva 14)				
A	AL	©	PP	
B	PP	D	Nailon, PVC-pinnoitettu	

Kaikki tuotteen osat ovat korroosionkestäviä eivätkä sisällä luonnonkumilateksia.

15 Ympäristöparametrit

Käyttöolosuhteet	
Ympäristön lämpötila	10-40 °C
Suhteellinen kosteus	15 %–93 % tiivistymätön
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	
Ympäristön lämpötila	0–40 °C
Suhteellinen kosteus	30 %–75 % tiivistymätön

Invacare distributors:

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv Autobaan 22 B-8210 Loppem Tel: (32) (0)50 83 10 10 Fax: (32) (0)50 83 10 11 belgium@invacare.com www.invacare.be

France:

Invacare Poirier SAS Route de St Roch F-37230 Fondettes Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 Fax: (33) (0)2 47 42 12 24 contactfr@invacare.com www.invacare.fr

Österreich:

Invacare Austria GmbH Herzog-Odilo-Straße 101 A-5310 Mondsee-Tiefgraben Tel: (43) 6232 5535 0 Fax: (43) 6232 5535 4 info-austria@invacare.com www.invacare.at

Sverige:

Invacare AB Fagerstagatan 9 S-163 53 Spånga Tel: (46) (0)8 761 70 90 Fax: (46) (0)8 761 81 08 sweden@invacare.com www.invacare.se

Danmark:

Invacare A/S Sdr. Ringvej 37 DK-2605 Brøndby Tel: (45) (0)36 90 00 00 Fax: (45) (0)36 90 00 01 denmark@invacare.com www.invacare.dk

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI) Tel: (39) 0445 38 00 59 Fax: (39) 0445 38 00 34 italia@invacare.com www.invacare.it

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 193 360
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

United Kingdom:

Invacare Limited Pencoed Technology Park, Pencoed Bridgend CF35 5AQ Tel: (44) (0) 1656 776 222 Fax: (44) (0) 1656 776 220 uk@invacare.com www.invacare.co.uk

Deutschland:

Invacare GmbH Am Achener Hof 8 D-88316 Isny Tel: (49) (0)7562 700 0 kontakt@invacare.com www.invacare.de

Nederland:

Invacare BV Galvanistraat 14-3 NL-6716 AE Ede Tel: (31) (0)318 695 757 Fax: (31) (0)318 695 758 nederland@invacare.com www.invacare.nl

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch



Invacare GmbH Am Aachener Hof 8 D-88316 Isny Germany

España:

Invacare SA Avda. Del Oeste n.50, 1ª, 1ª Valencia-46001 Tel: (34) (0)972 49 32 14 contactsp@invacare.com www.invacare.es

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Suomi:

Camp Mobility Patamäenkatu 5, 33900 Tampere Puhelin 09-35076310 info@campmobility.fi www.campmobility.fi







Yes, you can:



