

Umfangreiches Gurtprogramm zum Heben und Transferieren für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche





Netzstoff



Rückenverstärkung



Farbig gekennzeichnete Gurtschlaufen



Griff zur Unterstützung beim Manövrieren



Gurtschlaufen



Wadengurt

### aks-Liftergurte

aks-Liftergurte wurden sorgfältig geprüft und überarbeitet, so dass alle Gurte mit verstärkten Nähten für Standardlifter bis 250 kg Maximallast verwendetwerden können.

Zum Einsatz kommen verschiedene Materialien: Polyesterstoff für die Verwendung im Trockenbereich, spezieller wasserdurchlässiger und schnelltrocknender Polyester-Netzstoff für die Benutzung im Nassbereich, extrem reißfeste Gurtbänder aus Polyester, Polsterung aus verschiedenen Schaumstoffen um Druckspitzen bzw. ein Einschneiden des Liftergurtes in die Haut zu vermeiden und um den Körper des Patienten zusätzlich zu stützen und/oder den Tragekomfort zu erhöhen.

Zur Stabilisierung von Patienten sind einige Gurte im Rückenbereich mit integrierten Aluminiumleisten zur Rückenverstärkungen ausgestattet. Bei verschiedenen Gurten bieten wir zur Unterstützung von Patienten mit wenig Kopf- und Nackenstabilität eine separate, anklettbare Kopfstütze an. Unterschiedlich farbig gekennzeichnete Schlaufen der Gurtbänder erleichtern die Zuordnung der richtigen Einhängeposition beim jeweiligen Gurtband.

Alle Gurte sind bei 60° C waschbar.



Gurt ist auch im Nassbereich einsetzbar



Gurt ist teils auch bei Beinamputationen und -teilamputationen einsetzbar, abhängig von der Konstitution des Patienten



#### Kompatibilität

Unsere Liftergurte für Standardlifter sind bei allen aks-Standardliftern und bei verschiedenen Liftern von anderen Herstellern einsetzbar. Beachten Sie unsere Kompatibilitätserklärung für Liftergurte, diese finden Sie auf unserer Website www.aks.de

### aks-Standardgurt

Bereits die Materialqualität und die Verarbeitung dieses preisgünstigen Modells entsprechen den alltäglichen Anforderungen. Voraussetzung ist eine Mitwirkung des Patienten, der im Nacken- und Schulterbereich noch stabil ist. Mit diesem Gurt ist die Aufnahme vom Boden möglich. Die Beinstützen sind mit zusätzlichen Gewebeschichten gefertigt und mit einer Polsterung zur Verstärkung versteppt. Zudem gewährleistet diese Verstärkung einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminimierung an den Oberschenkeln. Die praktische Griffschlaufe an der Außenseite unterstützt die Pflegeperson beim Positionieren des Patienten. Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die aks-Kopfstütze eingeklettet werden (siehe Bild unten), sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Bestellnummern

Größe S - 88600

Größe M - 88601

Größe L - 88602

Größe XL - 88603

Größe XXL - 88604

Kopfstütze (optional) - 79712







aks-Standardgurt mit eingekletteter Kopfstütze

### aks-Badegurt

Dieser Gurt, aus einem äußerst reißfesten Polyesternetz, nimmt kaum Wasser auf, trocknet daher sehr schnell wieder ab und wurde speziell für den Einsatz im Bad bzw. Nassbereich konzipiert. Die Beinstützen sind mit Schaumstoff aufgepolstert. Diese Verstärkung gewährleistet einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung für die Oberschenkel.

Mit diesem Gurt können Sie Patienten vom Boden liegend aufnehmen, Voraussetzung ist eine Mitwirkung des Patienten, der im Nacken und Schulterbereich noch stabil ist. Die Schlaufen sind für die Wahl der richtigen Einhängeposition farblich unterscheidbar. Zudem besitzt der Gurt hinten eine Griffschlaufe zum "Manövrieren" des Patienten.

Kopfstütze (optional) - 79712



### aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze

Als Weiterentwicklung des Standardgurtes bietet dieser Gurt eine Reihe von Vorteilen: durch die spezielle Rückenverstärkung, die nahtlos in die Kopfstütze übergeht und die herausnehmbaren Versteifungen aus Aluminium, wird der Rücken- und Kopfbereich gestützt und gerade gehalten. Neben den Bein- und Schulterschlaufen bieten zusätzlich 4-fach verstellbare Kopfschlaufen die Möglichkeit, den Gurt individuell dem Patienten anzupassen. Dieser Vorteil gibt mehr Sicherheit und Halt. Das Netz im Gesäßbereich verhindert ein Herausgleiten des Patienten. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Der gesamte Körper wird stabilisiert und gestützt. Dieser Gurt ist besonders für Patienten mit Einschränkung des Stütz- und Bewegungsapparats im Oberkörper geeignet.



### aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze

Der Gurt aus Polyesternetz trocknet schnell und unterstützt insbesondere bei der Körperpflege im Bad. Siehe auch die Beschreibung zum aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze.

#### Bestellnummern



### aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex

Badgurt mit integrierter Kopfstütze, die nahtlos an den Rückenbereich anschließt. Patienten mit wenig Stabilität im Halsbereich können so schonend transferiert werden. Der Gurt besteht aus einem äußerst reißfesten Polyesternetz, das kaum Wasser aufnimmt und schnell trocknet. Er wurde speziell für den Einsatz im Bad bzw. Nassbereich konzipiert.

Die besonders breiten Beinstützen sind mit Schaumstoff ausgepolstert. Diese Polsterung gewährleistet einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung für die Oberschenkel. Die Aufnahme erfolgt standardmäßig im Sitzen. Eine Aufnahme aus dem Bett oder vom Boden ist ebenfalls möglich. Der Transfer erfolgt im Sitzen.

# Bestellnummern Größe S - 88691 Größe M - 88692 Größe L - 88693 Größe XL - 88694 Größe XXL - 88695

### aks-Hygienegurt

Der kompakte Zuschnitt und der große Ausschnitt im Gesäßbereich ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen des Gurtes. Der Patient kann anschließend sehr gut auf eine Toilette gesetzt werden, da im Gesäßbereich der Unterkörper frei bleibt. Mehr Komfort für den Patienten durch Auspolsterung unter den Armen, Beinpolsterung sowie Griffschlaufen am Gurt zum Bewegen des Patienten.

#### Bestellnummern

Größe S - 88630 Größe M - 88631 Größe L - 88632 Größe XL - 88633



### aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung

Für mehr Unterstützung und Stabilität im aks-Hygienegurt wurde der aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung entwickelt. Der höher geschnittene und verstärkte Rücken des Liftergurtes stützt den Patienten im Rücken. Der Achselbereich ist gepolstert und sorgt für einen angenehmen Sitz im Gurt. Die 4-fach verstellbaren Beinund Schulterschlaufen bieten die Möglichkeit, den Gurt individuell an den Patienten anzupassen. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Der Patient wird stabilisiert und gestützt, muss jedoch im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Durch den großen Ausschnitt im Gesäßbereich bleibt der Intimbereich frei, so kann der Patient sehr gut auf die Toilette gesetzt werden. Eine Griffschlaufe am Rücken erleichtert das Manövrieren des Patienten im Gurt



34

### aks-Komfort-Hygienegurt

Die Weiterentwicklung des aks-Hygienegurts zum komfortablen Gurt für den Toilettengang. Dieser Gurt bietet noch mehr Unterstützung im Rückenbereich und Sitzkomfort als der aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung. Er besitzt besonders breite, gepolsterte Beinstützen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine Kopfstütze angebracht werden.



### aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze

Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten Körper eine komfortable Unterstützung. Der hohe Rückenteil mit herausnehmbaren Versteifungen aus Aluminium sowie die integrierte Kopfstütze erhöhen die Sicherheit bei der Anwendung und Bequemlichkeit. Die eingearbeitete Polsterung der Beinstützen erhöht den Sitzkomfort druckempfindlicher Patienten. Unterschiedlich farbig gekennzeichneten Schlaufen ermöglichen verschiedene Einstellungen des Gurtes und dadurch eine variable Positionierung. Mehrere Griffschlaufen an der Außenseite unterstützen die Pflegeperson beim Manövrieren des Patienten im Gurt.

#### Bestellnummern





### aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze

Dieser Gurt besitzt ein ähnliches Schnittmuster wie der aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze und ist aufgrund der Netzstruktur des Materials wasserdurchlässig und trocknet schnell. Er ist speziell für den Nassbereich sehr gut geeignet.

#### Bestellnummern

Größe S - 88625

Größe M - 88626

Größe L - 88627

Größe XL - 88628

Größe XXL - 88629





### aks-Universal-Komfortgurt

Der Universal-Komfortgurt besteht aus flexiblen Gewebestoffen, die sich dem Körper des Patienten anpassen. Dieser Gurt ist für eine Anwendung im Trockenbereich vorgesehen und ist für die Aufnahme von Patienten mit Beinamputationen geeignet.

Im Kopf-/Schulterbereich ist eine Griffschlaufe zum Manövrieren des Patienten im Gurt angebracht.

#### Bestellnummern

Größe M - 88656

Größe L - 88657

Größe XL - 88658

Größe XXL - 88659





### aks-Universal-Netzgurt

Der Universal-Netzgurt bietet viel Flexibilität: die Schulterschlaufen sind zur Erreichung der optimalen Position 3-fach, die Beinschlaufen sogar 4-fach verstellbar. Optimaler Sitzkomfort bei Verwendung des aks-Tandembügels (s. Bild). Drei Griffschlaufen am Gurt helfen bei der Positionierung des Patienten während des Transfervorganges. Das einlagige Netzmaterial ist gut wasserdurchlässig und trocknet schnell, ideal für die Anwendungen im Nassbereich (Baden). Dieser Gurt ist zudem insbesondere für Patienten mit Beinamputationen geeignet.

#### Bestellnummern

Größe S - 88660 Größe M - 88661 Größe L - 88662 Größe XL - 88663 Größe XXL - 88664



### aks-Universalgurt Flex

Der Universalgurt Flex ist dem Universal-Netzgurt ähnlich. Dabei wurden bewusst die Griffschlaufen weggelassen, so dass der Gurt eine Zeit unter dem Patienten verbleiben kann (z. B. im Rollstuhl, Sitzschale). Dadurch ist es nicht notwendig den Gurt direkt nach dem Transfer zu entfernen.

#### Bestellnummern

Größe S - 88666 Größe M - 88667 Größe L - 88668 Größe XL - 88669 Größe XXL - 88670

### aks-Liegendtransportgurt

Mit diesem Gurt und dem aks-Tandembügel (s. Bild) können auch schwierige Transferprobleme gelöst werden. Selbst der Transfer von Patienten mit Hüftoder Rückenproblemen sowie mit Amputationen unterhalb des Kniegelenks, kann hiermit problemlos durchgeführt werden. Die Beinstützen sind zusätzlich mit Schaumstoff gepolstert. So werden die Oberschenkel sicher und bequem gestützt. Die durch Klettband fixierbare Kopfstütze (inklusive) gibt zusätzlichen Halt.

#### Bestellnummern


Größe M - 88646 Größe L - 88647 Größe XL - 88648 Größe XXL - 88649





### aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden

In Verbindung mit dem speziellen Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme garantiert dieser Gurt einen absolut schonenden Transfer auch von Schmerzpatienten. Optional kann eine Kopfstütze per Klettband fixiert werden und zusätzlich Halt im Kopf und Nackenbereich geben. Der aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden aus Netzmaterial ist wasserdurchlässig, trocknet schnell und ist damit für den Einsatz im Nassbereich optimal.

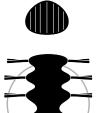

#### Bestellnummern

Größe M - 88651 Größe L - 88652 Größe XL - 88653 Größe XXL - 88654

#### ~ zum Baden

Größe M - 88677 Größe L - 88678 Größe XL - 88679 Größe XXL - 88680



aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme

Kopfstütze (optional) - 79712



### aks-Aufrichtgurt

Der Aufrichtgurt für aks-Standardlifter besteht aus zwei einzelnen Gurten mit unterschiedlich farbig gekennzeichneten, 3-fach verstellbaren Schlaufen. Er eignet sich besonders für den schnellen Transfer von Patienten, die über genügend Muskelkraft vom Schulterbereich über Oberkörper bis hin zu den Oberschenkeln verfügen. Der Gurt zeichnet sich durch einfache und schnelle Anwendung aus und fördert zudem den Erhalt der Mobilität.

#### Be stell nummer

Größe M - 88665





### aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe

Für den schnellen und unkomplizierten Transfer von Patienten mit genügend Eigenstabilität ist dieser Gurt geradezu prädestiniert. Er verfügt über eine integrierte, gepolsterte Rückenverstärkung, eine Achselpolsterung und eine Brustschlaufe, die den Patienten ein sicheres Gefühl gibt. Der Gurt kann auch als Hygienegurt genutzt werden. Die Griffschlaufe im Rückenbereich erleichtert das Manövrieren des Patienten im Gurt.

#### Bestellnummern

Größe S - 88640 Größe M - 88641 Größe L - 88642



### aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden

Der aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden besitzt ein ähnliches Schnittmuster und Aufbau wie der aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe. Für einen höheren Komfort, zur besseren Druckverteilung an den Oberschenkeln, besitzt er breitere Beinstützen. Er eignet sich, aufgrund der wasserdurchlässigen und schnelltrocknenden Netzstruktur des Materials, speziell für den Nassbereich.

#### Bestellnummern

Größe S - 88671 Größe M - 88672 Größe L - 88673





### aks-Kopfstütze

Die aks-Kopfstütze ist für folgende Produkte optional erhältlich: Standardgurt, Badegurt, Komfort-Hygienegurt, Liegendtransportgurt mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden. Verarbeitetes Flauschband an den oben genannten Gurten ermöglicht das Ankletten und Positionieren der Kopfstütze durch angenähtes Klettband/ Hakenband.

Bestellnummer - 79712



### aks-Verlängerungsschlaufen

Die aks-Verlängerungsschlaufen ermöglichen Ihnen, die Gurtschlaufen von geeigneten aks-Liftergurten zu verlängern, um diese schnell und einfach an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Sie bestehen aus extrem reißfesten Gurtband und sind einfach an den Gurtschlaufschlaufen der aks-Liftergurte zu befestigen. Sie sind für aks-Liftergurte an Standardliftern vorgesehen!



### Durch die Verlängerung der Gurtschlaufen können folgende Ziele erreicht werden:

- Abstand des Patienten zum Transportbügel vergrößern
- leichteres Einhängen der Gurtschlaufen am Transportbügel
- Verlängerung der Beinschlaufen um eine aufrechtere Sitzposition zu erreichen oder um den Winkel der Sitzposition offener zu gestalten (in der Hüfte)




#### **Technische Daten**

Länge gefaltet: 24 cm Effektive Verlängerung, nach Befestigung am aks-Liftergurt ca. 18 cm Verpackungseinheit: 2 Stück

#### Bestellnummern

2 Stück Verlängerungsschlaufen, Größe 24 cm - 88696

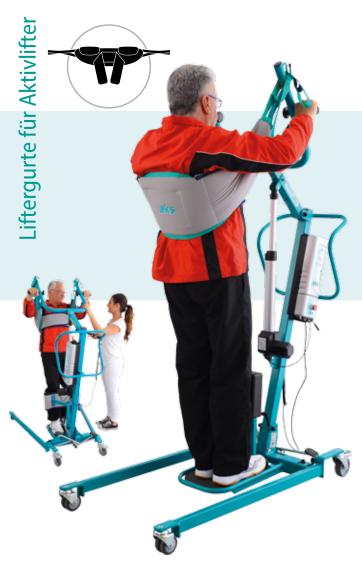

### aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter

Dieser Gurt für Aktivlifter unterstützt den Patienten beim Aufrichten /Absenken aus bzw. in eine sitzende Position. Die zusätzliche Brustschlaufe gibt dem Patienten während des Aufrichtens und Transfers ein sicheres Gefühl. Eine Auspolsterung im Achselbereich verhindert ein Einschneiden in den Achselhöhlen. Für Patienten bis 250 kg.

#### Bestellnummern


Größe S - 88681 Größe M - 88682 Größe L - 88683 Größe XL - 88684 Größe XXL - 88685

## aks-Wadengurt für Aktivlifter

Der Wadengurt sichert die Beine, gibt zusätzlichen Halt und unterstützt das Abdrücken mit beiden Beinen beim Aufrichten teilmobiler Patienten. Für Patienten bis 250 kg.

Bestellnummer - 79716



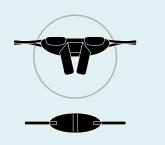

### aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter torneo® II und torneo® compact

Dieser Aufrichtgurt ist ausschließlich an den Aktivlifter torneo® II und torneo® compact einsetzbar. Der Aufrichtgurt ist um die Sitzschaukel für den Transfer in der Sitzposition erweitert. Das Wadenband bietet dem Patient mehr Sicherheit und Unterstützung. Für Patienten bis 150 kg.



#### Bestellnummern

Größe S - 89163 Größe M - 89164

Größe L - 89165

Größe XL - 89166

Größe XXL - 89167

Ersatz Sitzschaukel - 89205 Ersatz Wadenband - 89169

### aks-Liftergurte

aks-Standardgurt mit integrierter aks-Badegurtes Rückenverstärkung und Kopfstütze mit Kopfstütze Flex aks-Standardgurt/ aks-Komfortbadegurt/-Komfortgurt aks-Badegurt mit integrierter Kopfstütze D C aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze aks-Komfort-Hygienegurt aks-Hygienegurt aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung C C C aks-Schnelltransportgurt aks-Universal-Komfortgurt mit Brustschlaufe/ ~ zum Baden aks-Liegendtransportgurt aks-Aufrichtgurt (2 Einzelgurte)  $\mathsf{B} \square$ aks-Universal-Netzgurt/ aks-Aufrichtgurt aks-Universalgurt Flex mit Brustschlaufe für Aktivlifter/ ~ torneo® II und torneo® compact goliath® Gurt aks-Liegendtransportgurt mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden

Alle Maßangaben in cm	Α	В	С	D	E	F	Brustschlaufe
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe S	76	56	52	28	50		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe M	88	58	60	30	59		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe L	88	57	73	32	62		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XL	96	58	78	36	68		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XXL	104	64	81	44	80		
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe S	38	90	90	60	35	70	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe M	40	95	105	65	40	85	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe L aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XL	43 45	100 110	110 110	70 85	45 50	88 92	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XXL	45	120	115	100	50	96	
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe S	38	89	42	35	60	70	
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe M		103	65	50	74		
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe L	40	111	65	50	76		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe S	38	89	42	35	60		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe M	40	103	65	50	74		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe L	40	111	65	50	76		
aks-Hygienegurt, Größe S	90	22	65	40	-		
aks-Hygienegurt, Größe M	97	22	71	44	-		
aks-Hygienegurt, Größe L	108	25	78	58	-		
aks-Hygienegurt, Größe XL	120	25	90	64	-		
aks-Hygienegurt, Größe XXL	130	27	110	74	-		
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe S aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe M	86/29 96/33	24/36 26/40	65 69	38 47			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe L	107/34	28/40	75	51			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XL	118/37	25/40	89	63			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XXL	128/47	26/45	107	68			
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe S	78	32	70	24	46		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe M	88	39	77	28	58		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe L	96	42	95	32	65		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XL	105	45	105	40	69		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XXL	115	45	120	49	73		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe S	98	79	45	42	66		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe M	122	89	46	46	74		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe L	135	92	64	47	82		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe XL	152	94 100	87	52	80		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~,Größe XXL aks-Universal-Komfortgurt, Größe M	. 164 84	100	108 85	56 45	70 -		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe L	110	100	109	71	_		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XL	128	116	131	90	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XXL	152	114	151	109	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe S	110	126	107	56	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe M	115	133	117	62	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe L	130	140	129	68	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XL	145	145	144	83	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XXL	160	145	160	98	-		
aks-Liegendtransportgurt, Größe M	86	60	103	31	77		
aks-Liegendtransportgurt, Größe L	95	60	103	33	82		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XL	105	65	108	35	87		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XXL	115	65	108	37	95		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme, Größe M/~ zum Baden	66	183 189	46 66	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme, Größe L/~ zum Baden aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme, Größe XL/~ zum Baden	75 85	189	76	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme, Größe XXL/~ zum Baden	100	189	81	-	-		
aks-Aufrichtgurt (2 Einzelgurte), Größe M	110	17	-	_	_	_	
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe S	93	24	70	54/35	-	-	124
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe M	113	24	96	75/66	-	-	138
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe L	113	24	96	75/66	-	-	167
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter/~ torneo*, Größe S	87	27	-	-	16	-	114
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter/~ torneo®, Größe M	105	29	-	-	16	-	138
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter/~ torneo®, Größe L	120	29	-	-	16	-	147
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter/~ torneo®, Größe XL	141	29	-	-	16	-	167
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter/~ torneo®, Größe XXL	141	29	-	-	16	-	178
aks-Wadengurt	140	18	- 04	-	-		
goliath® Gurt A siehe bariatrisches Programm	112	68 72	94	50 63	70 94		
goliath® Gurt B siehe bariatrisches Programm goliath® Gurt C siehe bariatrisches Programm	126 140	72 76	106 120	63 78	102		
gondari Gurt Colone bariatriocheo i rogiannin	170	70	120	70	102		