

EINFACH GEHEN



GEMINO



GEMINO – SICHER, KOMFORTABEL & VIELSEITIG

Dank einer großen Auswahl an Modellen, Größen, Farben und Zubehör gibt es immer einen GEMINO, der Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Stil entspricht. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden: Ihr GEMINO bietet Ihnen immer 100 % Komfort, Sicherheit und Design.

DAS ORIGINAL

GEMINO 30

Seite 10



OUTDOOR-ROLLATOREN

GEMINO 30 COMFORT

Seite 12



GEMINO 60

Seite 14



GEMINO

DER BUDGET-ROLLATOR

GEMINO 20

Seite 8



ROLLATOREN FÜR KLINISCHE SPEZIALANWENDUNGEN

GEMINO 30 WALKER

Seite 16



GEMINO 60 WALKER

Seite 17



GEMINO 30 SPEEDCONTROL

Seite 18



GEMINO 30 PARKINSON

Seite 20





100 %
KOMFORT



ENTSPANNT GEHEN

Unsere Gemino-Rollatoren wurden im Hinblick auf Komfort und Freude am Gehen entwickelt. Ein leichter Aluminiumrahmen, qualitativ hochwertige Materialien und maximale Stabilität gewährleisten ein hervorragendes Gehgefühl im Innen- und Außenbereich. Dank der Höhenanpassung mit Memory-Funktion sind die ergonomischen Handgriffe immer in der richtigen Position. Und falls Sie eine Pause benötigen, können Sie sich dank der großzügigen Sitzfläche einfach ausruhen. Natürlich können Sie Ihren Rollator auch auf Reisen mitnehmen – er lässt sich ganz leicht auf eine kompakte Größe zusammenfallen.

Entdecken Sie, wie einfach und angenehm Gehen sein kann!

// AUSWAHL DER RAHMENGRÖSSE

Die richtige Rahmengröße ist ausschlaggebend, damit Sie sicher und bequem gehen. Zudem hat jede Rahmengröße auch eine andere Sitzhöhe - das ist wichtig für die richtige Haltung beim Sitzen.

// INTELLIGENTE SCHIEBEGRIFF-EINSTELLUNG


Die ergonomischen Schiebegriffe lassen sich schnell und einfach an Ihre Körpergröße anpassen. Sie werden sicher arretiert und sind aufgrund der speziellen Memory-Funktion immer in der richtigen Höhe.

// LEICHTES ZUSAMMENFALTEN MIT SELBSTVERRIEGELUNGSSYSTEM

Durch sein einzigartiges „Falt-Klick“-System lässt sich Ihr Gemino ganz einfach zusammenfallen und kompakt verstauen. Wenn Sie die Schiebegriffe in die niedrigste Position bringen, können Sie das Packmaß sogar noch weiter verringern. So lässt er sich gut im Auto transportieren. Übrigens, in engen Räumen können Sie selbst mit einem (teilweise) zusammengelegten Gemino noch sicher manövrieren.

// PRAKTISCH IM ALLTAG

Ein Gemino-Rollator ist der ideale Begleiter für jeden Tag. Er unterstützt Sie beim Gehen, aber Sie können auf ihm auch bequem sitzen, wenn Sie kurz eine Pause einlegen möchten. Ein komfortabler Rückengurt (optional) gibt Ihnen dabei zusätzlichen Halt. Sie haben viel zu tragen? Mit dem praktischen Korb oder einer schicken Tasche als Zubehör ist das Transportieren von Einkäufen kein Problem (Zuladung max. 10 kg).

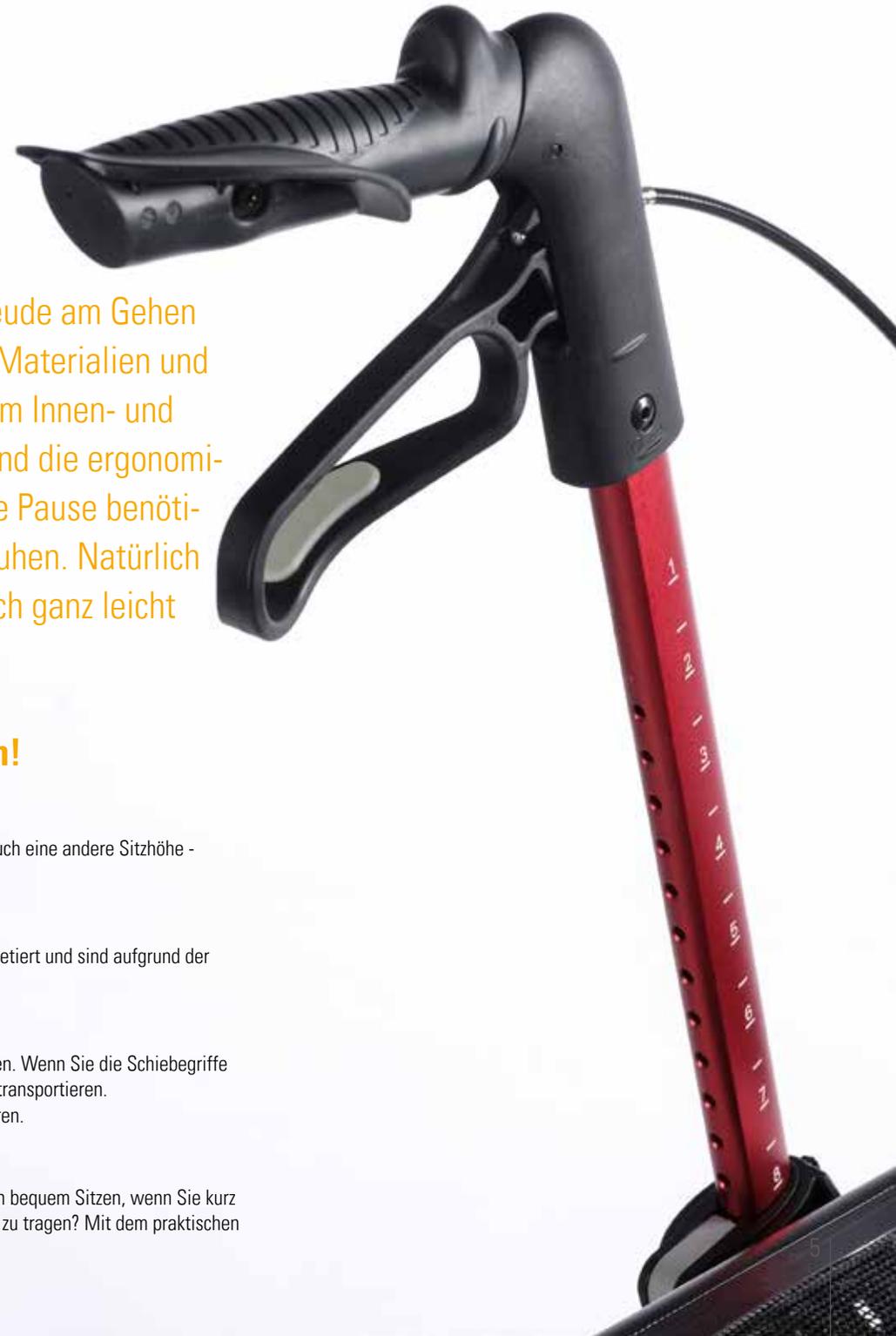

100 % SICHERHEIT



WOHIN SIE AUCH GEHEN

Egal wohin Sie gehen, mit einem Gemino-Rollator gehen Sie sicher. Sein kompakter Rahmen garantiert maximale Stabilität auf jedem Untergrund. Und die ergonomisch geformten Schiebegriffe bieten Ihnen stets eine hervorragende Unterstützung. Doch das ist noch nicht alles. Dank vieler zusätzlicher Funktionen sind Sie jederzeit sicher unterwegs.

// ULTRALEICHT ZUBEDIENENDE BREMSEN

Die ergonomisch geformten Bremsgriffe lassen sich mühelos bedienen und gewähren selbst bei leicht abgenutzten Rädern eine optimale Handhabung.

// HINDERNISSE EINFACH ÜBERWINDEN

Die ergonomisch geformte, abgerundete Ankipphilfe lässt Sie Stufen und Schwellen bequem überwinden. Dank der praktischen Kantenabweiser können Hindernisse einfach umfahren werden.

// GUTE SICHTBARKEIT BEI DUNKELHEIT

Sechs integrierte Reflektoren sorgen dafür, dass Sie auch im Dunkeln gut zu sehen sind. Das optional erhältliche Licht trägt zusätzlich zu Ihrer Sicherheit bei.



GEMINO 20



GEMINO 20

QUALITÄT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Wenn Sie einen hochwertigen Rollator suchen, der Ihnen ein ganz ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bietet, sollten Sie sich für den Gemino 20 entscheiden. Dieser Rollator ist sehr leicht und funktionell - und sieht dazu noch gut aus!

Die Basisversion des Gemino 20 ist in drei verschiedenen Rahmengrößen (Farbe silbergrau) erhältlich. Wählen Sie einfach das für Ihre Körpergröße passende Modell und genießen Sie 100 % Qualität und Funktionalität - und das zu einem attraktiven Preis.

// 100 % GEMINO – DIE KLUGE WAHL FÜR IHRE MOBILITÄT

Von Ihrem Rollator Gemino 20 können Sie ein echtes Gemino-Gehgefühl erwarten. Er hat alle technischen Funktionen des preisgekrönten Gemino 30 und kann mit praktischem Zubehör kombiniert werden.

// EINFACHE LAGERUNG UND TRANSPORTIERBARKEIT

Dank des einzigartigen „Falt-Klick-Systems“ lässt sich Ihr Gemino 20 ganz einfach zu einem kompakten Paket zusammenfalten. So lässt er sich gut verstauen und mühelos transportieren.




Hilfsmittelverzeichnis-POS.-Nr.:

Gemino 20	10.50.04.1179
Gemino 20 M	10.50.04.1180
Gemino 20 S	10.50.04.1181




GEMINO 30


DER ORIGINAL 100% ROLLATOR

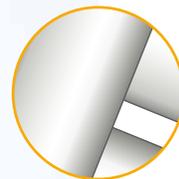


Silbergrau

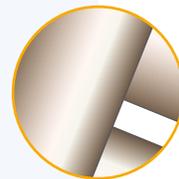


Champagne

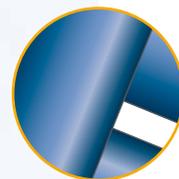


Saphirblau

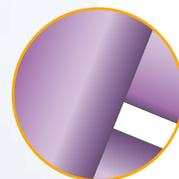


Pink

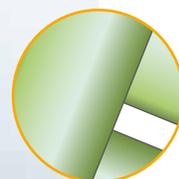

Apfelgrün

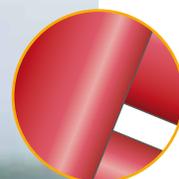

Scarletrot

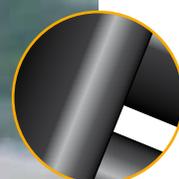

Schwarz

// DAS LEBEN IST BUNT

Jeder Mensch ist einzigartig. Unterstreichen Sie Ihre Individualität mit einer von sechs ansprechenden eloxierten Rahmenfarben.

// RAFFINIERTER TASCHEN ZUM KOMBINIEREN

Ergänzen Sie Ihren Gemino 30 mit einer modischen und praktischen Tasche mit Schulterriemen in Ihrer Lieblingsfarbe!



Graphite



Blau



Mintgrün



Pink



Alcantara Schwarz



Grün



Schwarz



Rot



GEMINO 30

STILVOLL UND SICHER GEHEN

Sie suchen nach einem leichten Rollator, der auffällt? Der Ihre Erwartungen in punkto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design noch übertrifft? Dann ist der preisgekrönte Gemino 30 die richtige Wahl.

Mit dem Gemino 30 bekommen Sie „das Beste vom Besten“. Seine Qualität und Klasse zeigen sich in der hochwertigen Verarbeitung und seinem modernen Design. Dafür wurde der Gemino unter anderem mit dem Red Dot Design Award und iF Product Design Award ausgezeichnet.

Hilfsmittelverzeichnis-POS.-Nr.:

Gemino 30 10.50.04.1156

Gemino 30 M 10.50.04.1177

Gemino 30 S 10.50.04.1178



GEMINO 30

comfort



GEMINO 30 COMFORT

KOMPROMISSLOS IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher, sowohl drinnen als auch draußen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

// RÄDER, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Schlendern Sie durch die Kopfsteinpflasterstraßen oder genießen Sie einen Waldspaziergang. Die großen, weichen, stoßdämpfenden Räder ermöglichen ein bequemes Gehen – in jedem Gelände.

// VERWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Der kompakte Rahmen sorgt für hohe Manövrierbarkeit und die großen, weichen Räder ermöglichen es Ihnen, Hindernisse mit Leichtigkeit zu überwinden, egal ob es sich um Türschwellen oder Bordsteine handelt.

// EINFACHE HANDHABUNG VON EXTRA ZULADUNG

Viel zu tragen? Der extra starke Korb trägt bis zu 10 kg.



GEMINO 60



// DER FEINE UNTERSCHIED

Mit den extragroßen, weichen Rädern bewältigen Sie buchstäblich jedes Hindernis mit Leichtigkeit.



// AUSGEZEICHNETE STABILITÄT

Der robuste, besonders breite und lange Rahmen des Gemini 60 gewährleistet zusammen mit den großen Rädern eine hervorragende Stabilität und Sicherheit, selbst auf unebenem Untergrund.



// MEHR RAUM FÜR SIE

Der große Radabstand bietet zusätzlichen Raum zum Gehen und eine sehr großzügige Sitzfläche: Ideal, wenn Sie eine Pause einlegen möchten.



// EXTREM BELASTBAR

Alle Modelle des Gemini 60 eignen sich für eine starke Beanspruchung und ein maximales Benutzergewicht von 150 kg. Sie haben viel zu tragen? Der besonders robuste Korb trägt bis zu 10 kg.



GEMINO 60

KOMFORT UND SICHERHEIT AUF JEDEM UNTERGRUND

Der Gemino 60 ist der perfekte Begleiter für alle, die keine Kompromisse machen wollen. Er ist leicht und trotzdem robust. Dank seiner extragroßen, weichen Räder begleitet er Sie selbst auf unebenem Untergrund sicher und zuverlässig. Ein Bummel über das Kopfsteinpflaster der Altstadt, ein erholender Waldspaziergang oder einfach nur die Türschwelle in Ihrem Zuhause meistern? All das ist mit dem robusten Gemino 60 möglich!

Der Gemino 60 ist besonders gut für Outdoor-Aktivitäten geeignet und extrem belastbar. Dank Faltmechanismus lässt er sich zudem schnell und einfach zusammenfallen und bequem im Auto transportieren.



Hilfsmittelverzeichnis-POS.-Nr.:
Gemino 60 10.50.04.1195
Gemino 60 M 10.50.04.1196



GEMINO 30

walker



MEHR STABILITÄT

Der Gemino 30 Walker ist besonders für Menschen geeignet, die beim Gehen zusätzlichen Halt und mehr Unterstützung brauchen. Er vereint die Vorteile des Gemino 30 mit einem Plus an Stabilität und eignet sich hervorragend für das Gehtraining.

// VERSTELLBARE UNTERARMAUFLAGEN

Die Unterarmauflagen lassen sich ganz einfach in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen und so individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die integrierten Brems- und Handgriffe sind gut zu erreichen und kinderleicht zu bedienen.

// ERWEITERTE BREMSOPTIONEN

Sie brauchen noch mehr Sicherheit? Ergänzen Sie Ihren Gemino 30 Walker mit einer Schlepptbremse oder dem innovativen Bremssystem SpeedControl.

Mit SpeedControl bremst Ihr Rollator automatisch, sobald sich Ihre Gehgeschwindigkeit erhöht. Dadurch wird eine aufrechte Körperhaltung unterstützt und Sie gehen sicher und entspannt an Ihrem Rollator.



Hilfsmittelverzeichnis-POS.-Nr.:

Gemino 30 Walker 10.50.04.1182

Gemino 30 M Walker 10.50.04.1183

GEMINO 60 walker



FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Sie sind viel unterwegs? Der Gemini 60 Walker begleitet Sie zuverlässig und gibt Ihnen dank seiner extragroßen, weichen Räder mehr Stabilität und Sicherheit beim Gehen – besonders draußen.

// KOMFORT UND SICHERHEIT

Die stabile Rahmenkonstruktion und die extra-großen, weichen Räder garantieren ein absolut komfortables und sicheres Gehen. Egal ob Kopfsteinpflaster oder Türschwellen - mit dem Gemini 60 Walker überwinden Sie jedes Hindernis mit Leichtigkeit.



GEMINO 30

SpeedControl



// AUCH FÜR KINDER

Der GEMINO 30 S SpeedControl, das kleinste Modell, ist auch für Kinder geeignet und in verschiedenen Farben erhältlich. Mit ihm haben sie alle Möglichkeiten, die Welt zu entdecken und absolute Sicherheit beim Gehen.



GEMINO 30 SPEEDCONTROL

DIE ROLLATOR INNOVATION

Der Gemino 30 SpeedControl mit seinem innovativen dynamischen Bremssystem gibt Ihnen maximale Kontrolle beim Gehen. So fühlen Sie sich völlig sicher und sind entspannt unterwegs. SpeedControl fördert eine gleichmäßige Gehgeschwindigkeit, unterstützt eine bessere, aufrechte Körperhaltung und verhindert, dass Ihnen der Rollator „wegrollt“.

//3-STUFIGES BREMSSYSTEM

Das innovative SpeedControl-Bremssystem kann je nach Bedarf in drei Stufen auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Sobald sich Ihre Gehgeschwindigkeit erhöht, werden die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern automatisch aktiviert. Dieser Widerstand ist natürlich nicht zu spüren, wenn Sie langsam gehen oder der Weg ansteigt.



Hilfsmittelverzeichnis-POS.-Nr.:

Gemino 30 SpeedControl	10.50.04.1156
Gemino 30 M SpeedControl	10.50.04.1177
Gemino 30 S SpeedControl	10.50.04.1178



GEMINO 30

parkinson



IN BEWEGUNG BLEIBEN

Der Gemino 30 Parkinson wurde speziell für Menschen mit Parkinson entwickelt und bietet spezielle Funktionen zur Unterstützung bei Gangblockaden und Gleichgewichtsstörungen.

// GLEICHMÄSSIG GEHEN

Der Gemino 30 Parkinson ist mit einer Schleppbremse ausgestattet, die zusätzlichen Widerstand bietet und eine gleichmäßige Gehgeschwindigkeit fördert. Die Stärke des Widerstands können Sie ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

// MEHR SICHERHEIT MIT UMKEHRBREMSE

Dank des Umkehrbremssystems hält der Rollator sofort an, sobald die Bremse losgelassen wird. Dies erhöht die Sicherheit, wenn Sie beim Gehen das sogenannte „Freezing“ (Einfrieren) erleben – das Gefühl, dass Sie Ihre Füße nicht mehr bewegen können.

// GANGBLOCKADEN ÜBERWINDEN

Im Fall einer Blockade, die das Weiterlaufen unmöglich macht, kann mit einer Taste auf dem Handgriff eine Laserlinie erzeugt werden. Indem Sie sich auf die rote Linie konzentrieren und sie überschreiten, können Sie die Blockade lösen und kommen wieder in Bewegung.



100 % AUSWAHL PRAKTISCHES ZUBEHÖR FÜR SIE

Für unsere Gemino-Rollatoren gibt es ein umfassendes Angebot an attraktivem Zubehör. Eine modische Tasche, ein praktischer Stockhalter, eine bequemer Rückengurt oder Licht für mehr Sicherheit? Wählen Sie einfach die Optionen, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen!

// RAFFINIERTE TASCHEN IN VIELEN FARBEN*

Ergänzen Sie Ihren Gemino mit einer verschließbaren Tasche in Ihrer Lieblingsfarbe! Mit Tragegriffen und Schulterriemen für ein einfaches Tragen.



Blau



Graphit



Schwarz



Pink



Grün



Rot



Alcantara Schwarz



Mintgrün

// TASCHEN FÜR GEMINO 30 S



Blau, schwarzer Druck



Grey, schwarzer Druck



Pink, schwarzer Druck



*Nicht verfügbar für Gemino 60 M





// REGENSCHIRM

Mit dem höhenverstellbaren Regenschirm können Sie beide Hände an den Schiebegriffen lassen und sind so auch bei Regenwetter sicher unterwegs.



// RÜCKENGURT*

Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterstützt Sie der Rückengurt beim sicheren und bequemen Sitzen. Er muss beim Zusammenfallen des Rollators nicht abgenommen werden.



// VERSTELLBARER KOMFORT-RÜCKENGURT**

Wählen Sie für zusätzlichen Komfort diesen großen, weich gepolsterten Rückengurt aus. Er ist individuell anpassbar und lässt sich leicht mit dem Rollator zusammenklappen.



// TABLETT

Praktisches Tablett mit Getränkehalter für den sicheren und einfachen Transport von Speisen und Getränken.



// STOCKHALTER

Hält Ihre Krücke oder Ihren Gehstock beim Gehen sicher befestigt. Leicht zu montieren, leicht zu erreichen.



// KORB FÜR SAUERSTOFFFLASCHEN***

Tragetasche mit Schulterriemen für den sicheren Transport von Sauerstoffflaschen.




// SCHLEPPBREMSE

Bietet zusätzlichen Widerstand, um Sie bei einem gleichmäßigen Gehtempo zu unterstützen. Ganz leicht auf die gewünschte Stufe anzupassen und einfach zu aktivieren/deaktivieren.



// UNIVERSALHALTERUNG

Geeignet um persönliches Zubehör am Rollator zu befestigen.

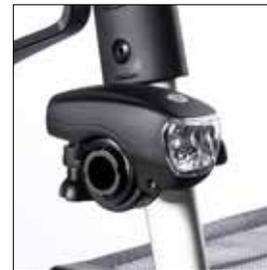

// LICHT

Sorgt dafür, dass Sie in der Dunkelheit gut sichtbar sind und damit für zusätzliche Sicherheit.



// INFUSIONSHALTERUNG

Höhen- und neigungsverstellbare Tropfhalterung.



// EINHANDBREMSE

Bequeme und sichere Bedienung mit einer Hand.



// Umkehrbremse

Der Rollator bleibt sofort stehen, wenn die Bremse gelöst wird.



Bremst automatisch bei einer plötzlichen Beschleunigung

// SPEEDCONTROL

Mit dem innovativen SpeedControl-Bremssystem, das für alle Modelle des Gemino 30 verfügbar ist, fühlen Sie sich beim Gehen völlig sicher. Ihr Rollator bremst automatisch, wenn Ihre Gehgeschwindigkeit zunimmt und gewährleistet so jederzeit ein gleichmäßiges Gehen und eine angenehme, aufrechte Haltung. Wenn Sie in normaler Geschwindigkeit gehen oder wenn der Weg ansteigt, ist der Widerstand natürlich nicht zu spüren.



// Stabilisierungsstange

Sichereres Gefühl, leicht abnehmbar für den Transport. Nur für Gemino 30 und Gemino 60 Walker erhältlich

* Verfügbarkeit pro Modell überprüfen ** Nicht erhältlich für Gemino 30/30 M Walker *** Nicht verfügbar für Gemino 60 M



MODELLÜBERSICHT



GEMINO 20

Leichter Design-Rollator. Hervorragende Funktionen zum attraktiven Preis



Verwendung im Innen- und Außenbereich

Tägliche Nutzung



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



GEMINO 30

Unser Original. Preisgekröntes Design vereint hohe Wendigkeit im Innenbereich mit starker Leistung im Außenbereich. Viele Farboptionen und umfangreiches Zubehör für einfache individuelle Anpassung.



Verwendung im Innen- und Außenbereich, hauptsächlich in der Stadt

Tägliche Nutzung



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Einfache Personalisierung durch Rahmenfarben und Taschenfarben. Breites Angebot an Zubehör



GEMINO 30 comfort

Entwickelt für komfortables Gehen im Innen- und Außenbereich, auch auf unebenem Gelände. Große, weiche Räder ermöglichen das mühelose Überwinden von Hindernissen.



Verwendung im Innen- und Außenbereich, auch auf unwegsamem Gelände.

Tägliche Nutzung / Aktive Nutzung



150 kg
130 kg (M)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)



Extragroße und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)



GEMINO 60

Für jede Art von Gelände und starke Beanspruchung entwickelt. Leicht und trotzdem robust.



Vorwiegend Verwendung im Außenbereich, auch auf unwegsamem Gelände, gelegentlich Innenbereich

Aktive Nutzung / starke Beanspruchung



150 kg
150 kg (M)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)



Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität



Extragroße und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



Extrabreite Sitzfläche



Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)



GEMINO 30 walker

Leichte Gehhilfe mit verstellbarer Unterarmauflage. Der perfekte Begleiter, wenn Sie zusätzliche Unterstützung und Stabilität im Innenbereich benötigen. Auch für das Gehtraining geeignet



Verwendung im Innenbereich

Tägliche Nutzung/ Gehtraining



150 kg
130 kg (M)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)



Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität



GEMINO 60 walker

Optimale Unterstützung und Stabilität – im Innen- und Außenbereich Vereint das komfortable Laufverhalten und die Stabilität des Gemino 60 mit der zusätzlichen Unterstützung und Sicherheit, die Sie von einer Gehhilfe erwarten.



Verwendung im Innen- und Außenbereich, auch auf unebenem Untergrund

Tägliche Nutzung/ Gehtraining



130 kg
130 kg (M)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)



Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität



Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität



Extragroße und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)



GEMINO 30 SpeedControl

Für zusätzliche Sicherheit werden die Bremsen an den Hinterrädern bei einer plötzlichen Beschleunigung automatisch aktiviert. Für das Gehtraining geeignet



Verwendung im Innen- und Außenbereich, hauptsächlich in der Stadt

Tägliche Nutzung



100 kg



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Bei einer plötzlichen Beschleunigung leisten die SpeedControl-Räder automatisch Widerstand



GEMINO 30 parkinson

Speziell für Personen mit Parkinson entwickelt. Mit Schleppbremse für ein gleichmäßiges Gehtempo, Umkehrbremsystem und Laserlicht zur Hilfe beim „Freezing“.



Verwendung im Innen- und Außenbereich, hauptsächlich in der Stadt

Tägliche Nutzung



130 kg
130 kg (M)



1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Umkehrbremsystem: Der Rollator hält sofort an, sobald die Bremse losgelassen wird.




Verlangsamungsbremse bietet zusätzlichen Widerstand und fördert ein gleichmäßiges Gehtempo



Laserlicht kann aktiviert werden, um „Freezing“ zu überwinden




GEMINO – TECHNISCHE DATEN

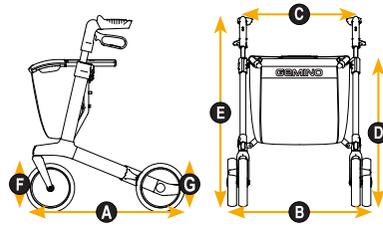

		GEMINO 20			GEMINO 30			GEMINO 30 comfort	
		20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M
ABMESSUNGEN									
Maximales Körpergewicht des Fahrers	kg	150	130	125	150	130	125	150	130
Empfohlene Größe des Benutzers	mm	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700
Maximale Traglast im Korb	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Gesamtlänge A	mm	650	650	680	650	650	680	680	680
Gesamtbreite B	mm	600	600	550	600	600	550	600	600
Gesamtgewicht ohne Korb (mit Korb)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4)	7,0 (7,3)	6,6 (6,8)	8 (7,7)	7,8 (7,5)
Breite zwischen der Mitte der Handgriffe C	mm	470	470	420	470	470	420	470	470
Sitzhöhe D	mm	620	550	480	620	550	480	640	570
Gesamthöhe E	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	800 - 1020	710 - 900
Gesamthöhe zusammengeklappt	mm	800	760	690	800	760	690	820	770
Gesamtlänge zusammengeklappt	mm	650	650	680	650	650	680	680	680
Gesamtbreite zusammengeklappt	mm	230	230	230	230	230	230	230	230
Durchmesser der Vorderräder F	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42
Durchmesser der Hinterräder G	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42
LEISTUNG									
Wendekreis	mm	840	840	790	840	840	790	880	880
FARBAUSWAHL									
Grau		✓	✓	✓					
Silbergrau					✓	✓	✓	✓	✓
Champagner					✓	✓			
Mitternachtsblau					✓	✓	✓		
Pink					✓		✓		
Apfelgrün					✓	✓			
Schwarz					✓				
ZERTIFIKATE									
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3									

CE Gemino-Walker-Rollatoren: EN 12182, ISO 11199-3 – Alle anderen Gemino-Rollatoren: EN 12182, ISO 11199-2

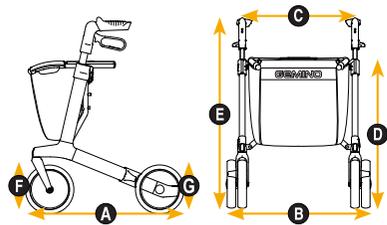

		GEMINO 60		GEMINO 30 walker		GEMINO 60 walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 parkinson	
		60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M
ABMESSUNGEN												
Maximales Körpergewicht des Fahrers	kg	150	150	150	130	130	130	100	100	100	130	130
Empfohlene Größe des Benutzers	mm	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700
Maximale Traglast im Korb	kg	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5
Gesamtlänge A	mm	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite B	mm	640	640	610	610	640	640	600	600	550	600	600
Gesamtgewicht ohne Korb (mit Korb)	kg	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	8,7 (8,9)	8,6 (8,8)	8,2 (8,4)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Breite zwischen der Mitte der Handgriffe C	mm	510	510	255	255	320	320	470	470	420	470	470
Sitzhöhe D	mm	620	530	620	550	620	530	620	550	480	620	550
Gesamthöhe E	mm	760-950	730 - 830	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880
Gesamthöhe zusammengeklappt	mm	840	800	970	890	1090	1010	800	760	690	800	760
Gesamtlänge zusammengeklappt	mm	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite zusammengeklappt	mm	230	230	355	355	355	355	230	230	230	230	230
Durchmesser der Vorderräder F	mm	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
Durchmesser der Hinterräder G	mm	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
LEISTUNG												
Wendekreis	mm	950	950	840	840	950	950	840	840	790	840	840
FARBAUSWAHL												
Grau												
Silbergrau		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagner												
Mitternachtsblau										✓		
Pink										✓		
Apfelgrün												
Schwarz												
ZERTIFIKATE												
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3				✓	✓	✓	✓					



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

